

bloominds®

Red Light Glow opasek pro oblast břicha a zad



Co je Red Light Glow opasek pro oblast břicha a zad

Bloominds Glow Belt je bezdrátový terapeutický opasek využívající kombinaci červeného (660 nm) a blízkého infračerveného světla (850 nm), které podporují přirozenou regeneraci organismu. Díky flexibilnímu provedení se pohodlně přizpůsobí oblasti břicha, beder i dalších částí těla a umožňuje komfortní terapii doma i na cestách.

Jak Glow Belt funguje

Fotobiomodulace (660 nm + 850 nm)

Glow Belt využívá dvě klinicky nejpoužívanější vlnové délky světla.

Červené světlo (660 nm) působí především na povrchové vrstvy pokožky, kde podporuje mikrocirkulaci, tvorbu kolagenu a regeneraci buněk.

Blízké infračervené světlo (850 nm) proniká hlouběji do svalů a měkkých tkání, kde podporuje tvorbu buněčné energie (ATP), napomáhá regeneraci, zmírňuje zánětlivé procesy a přispívá k rychlejší obnově tkání.

Pulzní režimy

Opasek nabízí několik pulzních režimů světla.

Pulzní terapie pomáhá stimulovat lokální krevní oběh, podporuje mikrocirkulaci tkání a může přispět k rychlejší regeneraci namáhaných svalů.

K dispozici jsou režimy:

- 147 Hz
- 294 Hz
- Dýchací (Breathing) režim

Vibrační masáž

Integrované vibrace příjemně uvolňují svalové napětí a podporují prokrvení ošetřované oblasti.

Pravidelné používání může přispět ke zmírnění svalové únavy, zlepšení regenerace a celkovému pocitu uvolnění.

Ovládání zařízení

Tlačítko ON/OFF

Podržte 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.


Po zapnutí se automaticky spustí 10minutová terapie.

Krátkým stiskem měníte intenzitu světla.

K dispozici jsou tři úrovně intenzity:

- 50 %
- 75 %
- 100 %

Zařízení si pamatuje naposledy použitá nastavení.

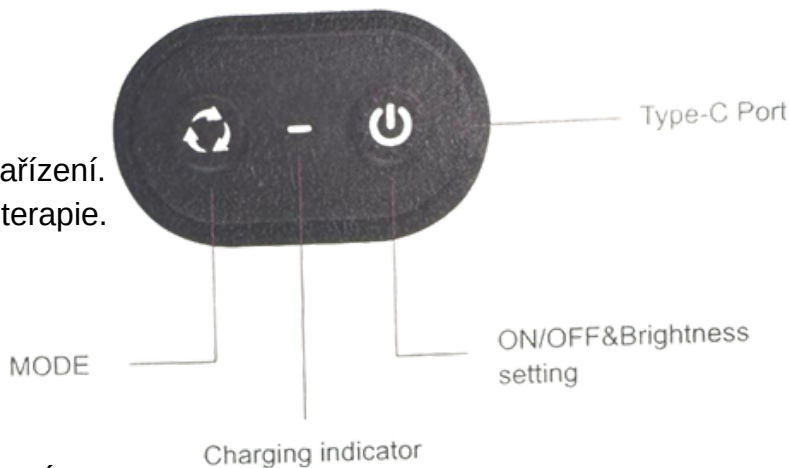

Indikátor nabíjení

Červená kontrolka bliká – probíhá nabíjení.

Zelená kontrolka svítí – baterie je plně nabitá.

Zelená kontrolka bliká – nízký stav baterie.

Tlačítko MODE

Slouží k přepínání pulzních režimů.

1. stisk – režim 147 Hz
2. stisk – režim 294 Hz
3. stisk – dýchací režim
4. stisk – vypnutí pulzního režimu

Podržením tlačítka MODE po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete vibrační masáž.

Jak zařízení používat

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Přiložte Glow Belt přímo na pokožku v oblasti břicha, beder nebo jiné požadované části těla.
- Upevněte opasek pomocí nastavitelného pásu.
- Zapněte zařízení podržením tlačítka ON/OFF.
- Nastavte požadovanou intenzitu světla a případně vibrační či pulzní režim.
- Doporučená délka jedné terapie je 10–20 minut.
- Po skončení se zařízení automaticky vypne.

Doporučené používání

- 10–20 minut na jednu terapii
 - 1–2× denně
 - mezi jednotlivými terapiemi doporučujeme několik hodin odstup
- Nejlepších výsledků dosáhnete při pravidelném používání.

Údržba

Zařízení čistěte pouze měkkým lehce navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Po čištění nechte zařízení zcela vyschnout.

Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- Bloominds Glow Belt
- USB-C nabíjecí kabel
- Prodlužovací pás (dle varianty)
- Uživatelský manuál



Důležité bezpečnostní pokyny

Nedívejte se přímo do svítících LED diod.

- Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani jej neponořujte do vody.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek.
- Nepoužívejte při poškození zařízení.
- K nabíjení používejte pouze doporučený USB-C kabel.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Těhotné ženy, osoby s fotosenzitivitou nebo užívající léky zvyšující citlivost na světlo by měly používání konzultovat s lékařem.
- Před čištěním zařízení vždy vypněte.

Technické informace

Počet LED diod	<i>240 duálních LED čipů / 480 světelných bodů</i>
Intenzita ozáření	<i>25 mW/cm²</i>
Kapacita baterie	<i>2000 mAh</i>
Napájení	<i>USB-C, 5V DC</i>
Rozměry	<i>1200 × 180 × 19 mm</i>
Ošetřovaná plocha	<i>480 × 180 mm</i>



bloominds[®]

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**