


bloominds®

# Celler8 Cestovní sada



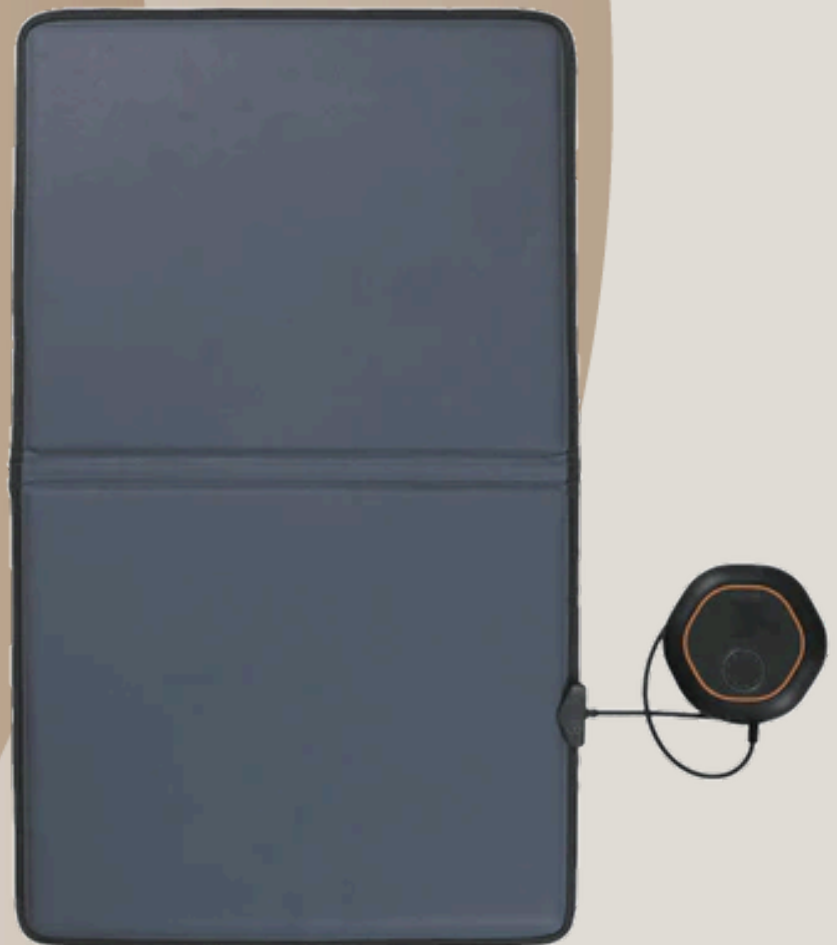

## Co je Celler8®?

Úleva od bolesti. Rychlejší hojení. Hluboký pocit klidu.

Celler8® je revoluční technologie využívající pulzní elektromagnetické pole (PEMF) pro hlubokou regeneraci, zvýšení buněčné energie (ATP) a podporu samoléčebných procesů těla. Příklad stimuluje přirozené regenerační mechanismy těla na buněčné úrovni a pomáhá snižovat bolest, zánět i chronickou únavu. Celler8® podložka slouží k pohodlné celotělové terapii, kterou lze využít doma, v kanceláři i během spánku. Pravidelné používání zlepšuje spánek, regeneraci, výkon i celkovou rovnováhu nervového systému.

# Jak funguje Celler8®?

## PEMF technologie

Celler8 využívá pokročilou technologii PEMF (Pulsed Electromagnetic Field), která stimuluje tělo pomocí pulzních elektromagnetických polí v rozmezí 1–100 Hz. Tato nízkofrekvenční pole napodobují přirozené biorytmy lidského těla a cíleně ovlivňují buněčný metabolismus, mikrocirkulaci a obnovu mitochondrií – energetických center našich buněk. Díky tomu dochází k aktivaci přirozené regenerace, snížení zánětů a hlubokému uvolnění nervového systému.

## Celler8® řídicí jednotka

CELLER8 řídicí jednotka je vynikající volbou pro lokální využití PEMF terapie na určitou oblast těla. Díky jednoduchému připevnění na jakoukoli část těla pomocí pásku, který je součástí balení, je vhodné i pro cestování.

## Celler8® podložka

Celotělová podložka CELLER8 poskytuje komplexnější PEMF terapii. Tento způsob zajišťuje, že PEMF působí na všechny buňky v těle, nikoliv pouze na určitou oblast.

## Intenzita

Intenzita je síla magnetického pole vytvořeného zařízením pro terapii PEMF; obvykle se měří v gausech (můžete se setkat také s hodnotami  $\mu\text{T}$  - mikrotesla)

Pro představu: Země má průměrnou intenzitu 0,5 gaussu, to je to, co získáte při uzemnění naboso. CELLER8 má nastavitelnou intenzitu 1-100 gaussů.

## Frekvence

Elektromagnetická pole jsou vyzařována různou rychlostí měřenou za sekundu, známou jako frekvence, která se měří v Hz. Na rozdíl od intenzity má frekvence menší vliv na léčebnou stránku terapie, používá se hlavně k podpoře různých stavů mozkových vln, jako je spánek, meditace, soustředění apod. Tyto stavy mozkových vln se dělí do 5 kategorií: delta, theta, alfa, beta a gama. Přístup ke každému z těchto rozsahů je snazší díky čtyřem přednastaveným programům nebo vlastnímu programu, který vám umožňuje vybrat si libovolnou frekvenci od 1 do 100 Hz.

## Polarita

Polarita označuje směr, kterým se pohybuje magnetické pole, který může být buď k severu nebo k jihu. Jednoduše řečeno, magnetické pole je vysíláno z jedné strany podložky nebo lokalizovaného aplikátoru, vytvoří kruh a vrací se na druhou stranu. U zařízení CELLER8 máte možnost zvolit si severní nebo jižní směr.

# Hlavní benefity

Celler8 je moderní regenerační technologie využívající PEMF (pulzní elektromagnetická pole) pro hlubokou buněčnou obnovu, zklidnění nervového systému a úlevu od bolesti. Frekvenční rozsah 1–100 Hz se přirozeně ladí na biorytmy těla a stimuluje klíčové regenerační procesy. Stačí jen pár minut denně k aktivaci samoléčebných mechanismů, nastartování vitality a podpoře rovnováhy těla i mysli.

## Uvolňuje tělo i mysl

Celler8 pomáhá tělu uvolnit fyzické napětí, emoční stres i energetické bloky. Technologie působí hluboko do tkání a zároveň harmonizuje mozek a nervový systém.

- ✓ okamžité uvolnění svalů, napětí a stresu
- ✓ hluboká relaxace těla i psychiky

## Ulevuje od bolesti a zánětů

Díky stimulaci PEMF dochází ke zrychlené regeneraci tkání a snížení zánětlivých procesů. Účinně podporuje úlevu od akutní i chronické bolesti.

- ✓ úleva od bolesti zad, svalů a kloubů
- ✓ zmírnění zánětlivých reakcí v těle

## Podporuje regeneraci a rychlejší hojení

PEMF stimuluje tvorbu ATP (buněčné energie), zlepšuje okysličení a cirkulaci. Pomáhá tělu obnovit rovnováhu po fyzickém výkonu, nemoci i stresové zátěži.

- ✓ rychlejší hojení po úrazech nebo operacích
- ✓ podpora regenerace po sportu a zátěži

## Zklidňuje nervový systém a harmonizuje tělo

Pravidelné používání zlepšuje kvalitu spánku, posiluje imunitu a obnovuje vitalitu. Tělo i mysl se dostávají zpět do přirozeného rytmu.

- ✓ posílení nervové rovnováhy
- ✓ podpora imunity a celkového zdraví

# Popis Celler8® a kontraindikace

## Popis Celler8®

CELLER8® je neinvazivní zařízení s pulzním elektromagnetickým polem (PEMF) určené k použití jako lokalizovaná aplikace PEMF nebo k napájení nebo spolu s podložkou CELLER8® pro aplikaci PEMF na celé tělo.

Podložka CELLER8® a CELLER8® poskytuje magnetickou terapii pomocí elektromagnetických polí generovaných měděnými cívkami a používá se ke zlepšení celkové kondice jako součást zdravého životního stylu.

CELLER8® je určen pro jednoho uživatele a neměly by jej používat osoby mladší 12 let.

## Kontraindikace

Pokud se vás týká některý z těchto bodů, používání Celler8® pro vás **není vhodné**.

- Implantované elektronické přístroje – například srdeční stimulátor (pacemaker), kochleární implantát nebo intratekální pumpa. Magnetické pole Celler8® může narušit jejich funkci.
- Pacienti po transplantaci orgánů – stimulace PEMF může zvýšit riziko imunitní reakce vůči transplantátu.

Pokud se vás týká některý z těchto bodů, používání Celler8® **konzultujte s lékařem**.

- Těhotenství – bezpečnost PEMF během těhotenství není dostatečně prozkoumána, používejte opatrně.
- Epilepsie a neurologické poruchy – existuje teoretické riziko spuštění záchvatu.
- Aktivní krvácení – stimulace může zvyšovat průtok krve, čímž může zhoršit krvácení z rány nebo při menstruaci.

Další potenciální kontraindikace (méně časté)

- Zánětlivé či bakteriální stavy – např. tuberkulóza, akutní virové infekce, mykózy.
- Kardiopatie a závažné arytmie, tumory – doporučuje se konzultace s lékařem.
- Děti – zejména těmi, kteří stále rostou, se doporučuje opatrnost.
- Magnetizovatelné protézy – zejména staré typy mohou být citlivé na elektromagnetické pole.

# Důležité bezpečnostní informace

**VAROVÁNÍ:** Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození CELLER8®, CELLER8® Mat či jiného majetku. Před použitím si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené informace.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte produkty CELLER8®, pokud máte kardiostimulátor, ICD nebo jiné elektrické implantáty.

**VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič není vhodný pro děti mladší 12 let.

**VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo ke zranění zapletením, udržujte kabely při používání v pořádku.

**VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k poruchám krevního oběhu, zajistěte, že popruhy nejsou upevněny příliš pevně.

**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze schválený AC nabíjecí adaptér dodaný s produkty CELLER8® a zajistěte, že je zapojen do bezpečné a snadno přístupné zásuvky. Příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění, ztrátu výkonu a poškození produktu CELLER8® nebo CELLER8® Mat. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím neschváleného příslušenství.

**VAROVÁNÍ:** Neotevírejte produkty CELLER8® ani se nepokoušejte o jejich opravu. Demontáž může vést k poškození výrobku a zranění.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte produkty CELLER8® nebo CELLER8® Mat v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou otevřený oheň, radiátory, ohřívače či vyhřívané přikrývky. Může dojít ke zranění a poškození zařízení. Provozní teploty najdete v technické specifikaci.

**VAROVÁNÍ:** Pokud zaznamenáte jakoukoli nežádoucí reakci při používání produktů CELLER8®, okamžitě přestaňte s používáním a poraďte se s lékařem.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte produkty CELLER8®, pokud jsou viditelné známky poškození.

**VAROVÁNÍ:** U zranitelných osob je při používání výrobku nutný dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání. To zahrnuje osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

**POZOR:** Za žádných okolností nesmí být produkty CELLER8® nebo CELLER8® Mat ponořeny do tekutin nebo vystaveny postříkání.

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte s produkty CELLER8® pouze originální příslušenství CELLER8®. Příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit ztrátu výkonu a poškození produktů CELLER8® nebo CELLER8® Mat. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neschváleným příslušenstvím.

**POZOR:** K čištění produktů CELLER8® používejte pouze neabrazivní hadřík. Použití jiných čisticích prostředků nebo postupů neschválených výrobcem může vést k poškození a snížení výkonu CELLER8® nebo CELLER8® Mat.

**POZOR:** Nikdy neskladujte podložku CELLER8® nebo CELLER8® ve vozidle za extrémně chladného nebo horkého počasí. Rozsah skladovacích teplot a vlhkosti najdete v technické specifikaci.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy neskladujte CELLER8® po delší dobu s vybitou baterií.

**POZNÁMKA:** Produkty CELLER8® nejsou zdravotnické prostředky a neměly by nahrazovat odborný lékařský posudek. Nejsou určeny k léčbě, zmírnění nebo prevenci jakéhokoli zdravotního stavu. Před rozhodnutím týkajícím se vašeho zdraví se poraďte se svým lékařem.

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, že produkty CELLER8® jsou používány v doporučeném rozsahu provozních teplot a vlhkosti, který je uveden v technické specifikaci.

**POZNÁMKA:** Pokud je během vlastního programu nastavena frekvence na 40 Hz nebo vyšší, zajistěte, že CELLER8® je připojen k elektrické síti, protože samotná baterie tuto frekvenci nepodporuje.

**POZNÁMKA:** Po vypnutí zařízení se neuloží žádné změny přednastavených programů.

**POZNÁMKA:** Na konci relace s nočním programem se nezve žádný zvuk, aby se minimalizovalo rušení uživatele.

**POZNÁMKA:** Pokud zvolíte aplikaci CELLER8® Mat před jeho připojením k CELLER8®, zobrazí se upozornění "Mat Not Connected."

# Obsah balení



Sada CELLER8® může obsahovat následující položky:

1. CELLER8®
2. CELLER8® Podložka (prodává se samostatně)
3. AC napájecí adaptér
4. Elastický popruh
5. Rychlý průvodce
6. Taška CELLER8®
7. CELLER8® Taška s podložkou (součástí CELLER8® Podložky)

# Nabíjení Celler8®

1 - Nabíjecí port

2 - CELLER8® Podložka Port

Chcete-li nabíjet CELLER8®, připojte dodaný předem schválený AC napájecí adaptér do nabíjecího portu **(1)** CELLER8®.

Poté připojte AC napájecí adaptér do elektrické sítě.



**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze předem schválený AC nabíjecí adaptér dodávaný s produkty CELLER8® a zajistěte, aby byl zapojen do bezpečného a snadno přístupného síťového zdroje. Upozorňujeme, že příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění, ztrátu výkonu a poškození podložky CELLER8® nebo CELLER8®. Záruky na produkt se nevztahují na selhání produktu nebo poškození vyplývající z použití s neschváleným příslušenstvím.

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli možnému zranění zapletením, udržujte kabely při používání v pořádku.


## CELLER8® Vypnuto

Když je CELLER8® vypnutý a zapojený do sítě, CELLER8® se bude nabíjet a na obrazovce se objeví animovaná baterie.



## CELLER8® Zapnuto

Když je CELLER8® zapnutý a zapojený do sítě, CELLER8® se bude nabíjet a stav baterie najdete v pravém horním rohu.

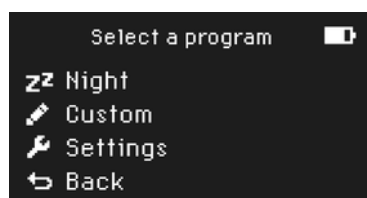

# Nastavení Celler8®


## Celler8® (řídící jednotka)

1. CELLER8® obrazovka
2. Ovládací kolečko



## Celler8® + Celler8® podložka

1. CELLER8®
2. Popruh
3. AC napájecí adaptér
4. CELLER8® podložka - kabel
5. CELLER8® podložka

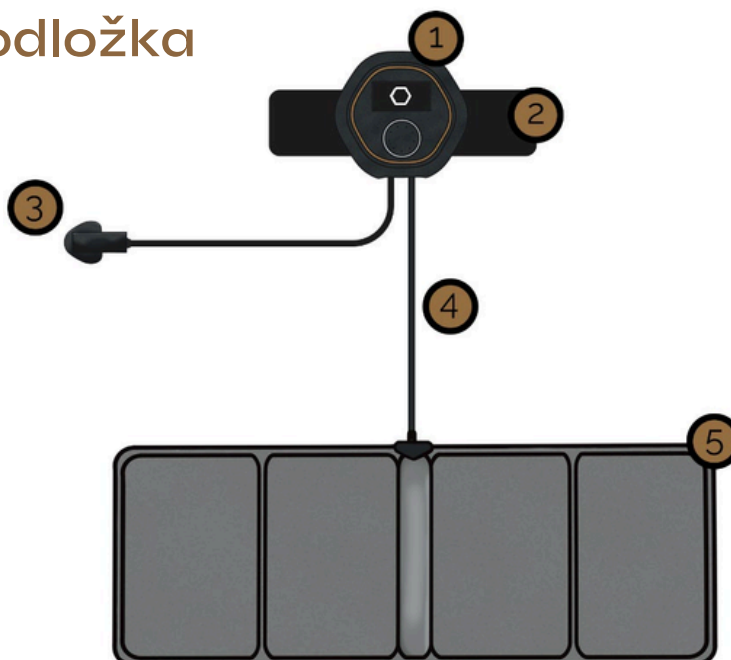

## Zapnutí a vypnutí Celler8®

Chcete-li CELLER8® **zapnout**, stiskněte ovladač na 2 sekundy. Na obrazovce se objeví animace, po ní obrazovka Menu a ovládací kolečko se rozsvítí, což znamená, že je CELLER8® zapnutý.

Chcete-li CELLER8® kdykoli **vypnout**, podržte ovladač na 3 sekundy, dokud nezhasnou světla a obrazovka, což znamená, že zařízení je nyní vypnuto.

Zařízení má také funkci automatického vypínání. Pokud je zařízení na obrazovce Menu a po dobu 60 sekund nedojde k žádné aktivitě, automaticky se vypne. Zařízení se také automaticky vypne na konci programu.

## Navigace v Celler8®

CELLER8® má ovládací kolečko, které umožňuje rychlou a snadnou navigaci CELLER8®. Chcete-li se pohybovat v nabídkách CELLER8®, lze ovládací kolečko otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček pro pohyb nahoru a dolů. Ovládací kolečko je také tlačítko potřebné k provedení a potvrzení výběru. Chcete-li použít tlačítko, stiskněte střed ovládacího kolečka, uslyšíte cvaknutí.

## Nastavení Celler8® popruhu

CELLER8® je dodáván s vyhrazeným elastickým páskem, který pomáhá udržet CELLER8® na místě při použití pro lokalizované aplikace.


Chcete-li nastavit, protáhněte popruh přes sponu na zadní straně CELLER8®.



Přidrže Celler8® na místě a obtočte elastický pásek kolem oblasti těla. Zajistěte popruh pomocí suchého zipu. Celler8® a popruh by měly být přilnutý, ale pohodlný.


**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli možnému zranění při špatné cirkulaci, ujistěte se, že popruhy nejsou upevněny příliš pevně.

## Příklady umístění popruhu s Celler8®

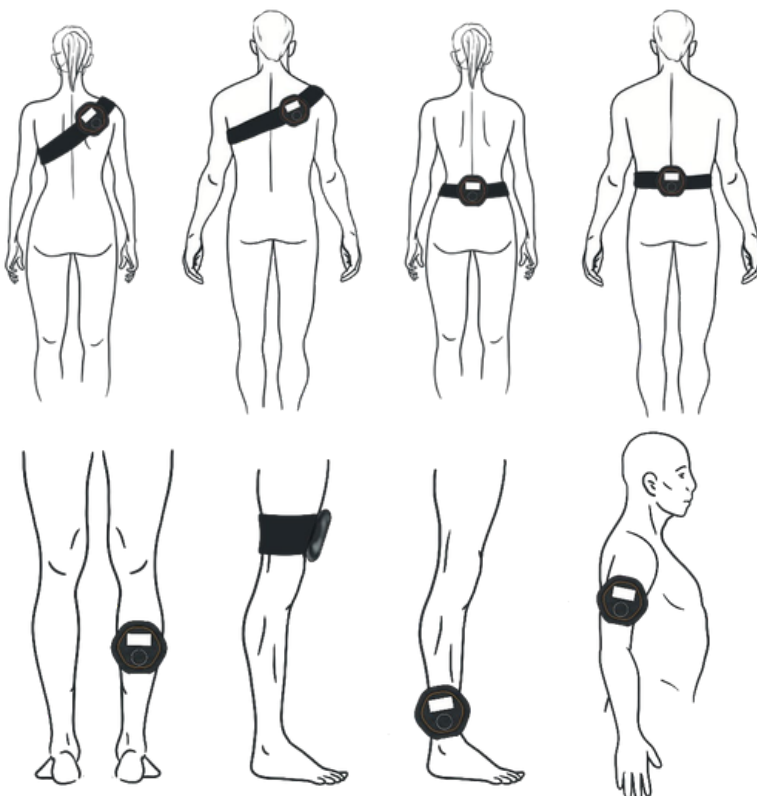

## Nastavení podložky Celler8®

CELLER8® lze použít spolu s podložkou Celler8® pro aplikaci PEMF na celé tělo. Celler8® lze použít jako ovladač pro podložku Celler8® nebo jej lze použít současně pro celotělovou i lokalizovanou aplikaci PEMF, jak je znázorněno níže.

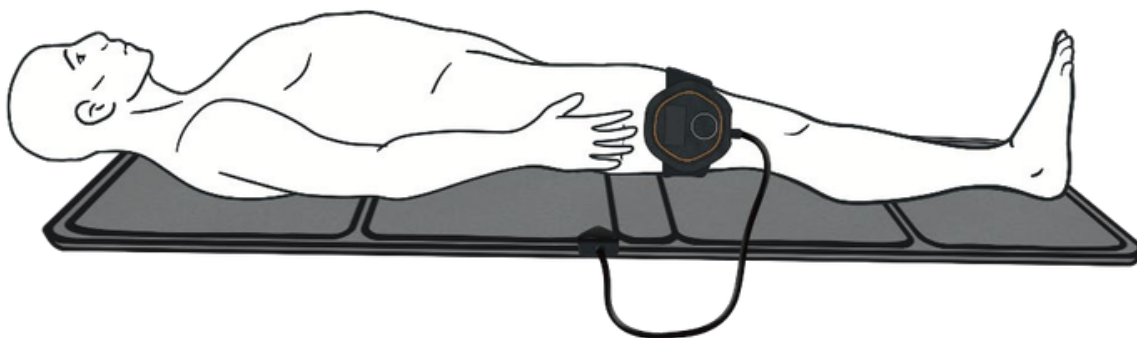

CELLER8® lze používat s podložkou Celler8® na baterie i ze sítě. Když se podložka Celler8® používá, měla by být zcela rozložená.

**POZNÁMKA:** Pokud je během vlastního programu frekvence nastavena na 40 Hz a vyšší, ujistěte se, že Celler8® je zapojen do elektrické sítě, protože samotná baterie nemůže podporovat vyšší frekvence.

**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze předem schválený AC napájecí adaptér dodávaný s produkty Celler8® a zajistěte, aby byl zapojen do bezpečného a snadno přístupného síťového zdroje. Upozorňujeme, že příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění, ztrátu výkonu a poškození podložky Celler8® nebo Celler8®. Záruky na produkt se nevztahují na selhání produktu nebo poškození vyplývající z použití s neschváleným příslušenstvím.

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli možnému zranění zapletením, udržujte kabely při používání v pořádku.

Chcete-li použít podložku Celler8® s Celler8®, zapojte kabel k podložce Celler8® do portu Celler8® podložka Port (2).




# Výběr způsobu aplikace Celler8®

Když je CELLER8® zapnutý, na obrazovce se zobrazí nabídka aplikací. Existují tři možnosti aplikace:


## Celler8® (řídící jednotka)

Aplikace “**Controller**” použije lokalizovaný PEMF.

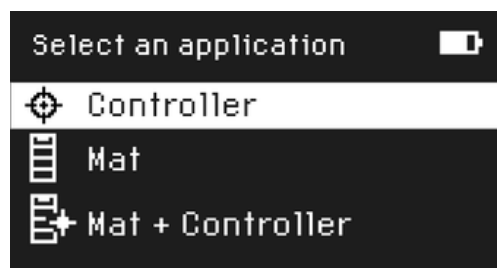

## Celler8® podložka

Aplikace “**Mat**” bude používat pouze CELLER8® podložku k aplikaci celotělových PEMF a musí být zapojena do CELLER8®, aby mohla být použita. V tomto režimu bude vydávat PEMF pouze podložka CELLER8®. Před výběrem této možnosti se prosím ujistěte, že je podložka CELLER8® připojena k CELLER8®.

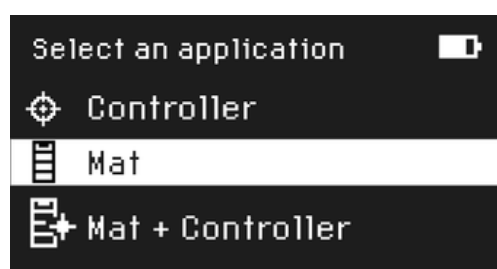

## Celler8® + podložka


Aplikace “**Mat + Controller**” umožňuje CELLER8® Mat aplikovat PEMF na celé tělo, ale také používá CELLER8® k současné aplikaci lokalizovaného PEMF. Jak CELLER8® Mat, tak CELLER8® budou v tomto režimu emitovat PEMF. Před výběrem této možnosti se prosím ujistěte, že je podložka CELLER8® připojena k CELLER8®.



## Poznámka

Pokud vyberete aplikaci “**Mat**” před připojením CELLER8® podložky k CELLER8® tak se objeví obrazovka “**Mat Not Connected**” (podložka není připojena).

Pokud tato chyba přetrvává, přečtěte si část **Odstraňování problémů** v této příručce.

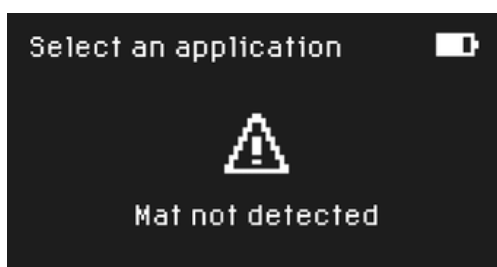


Pomocí ovladače vyberte požadovanou aplikaci a stisknutím ovladače vyberte.


# Výběr programu Celler8®

Jakmile vyberete požadovaný aplikátor, objeví se programové menu. Na výběr jsou 4 přednastavené programy:

- Ranní
- Večerní
- Meditační
- Noční

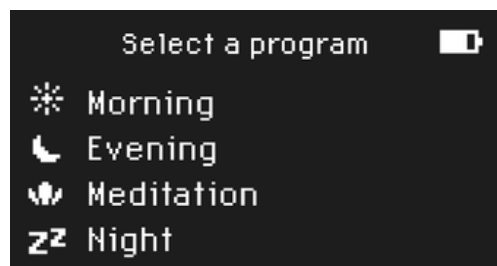

Případně se můžete rozhodnout pro **vlastní program "Custom"**. Více informací o nastavení vlastního programu naleznete na následujících stránkách.

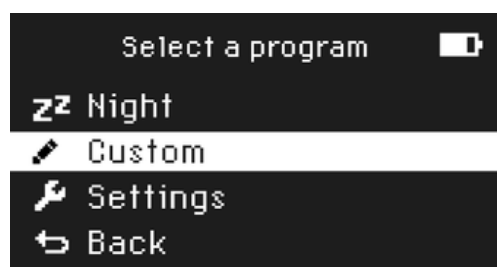

Chcete-li se vrátit do nabídky aplikací, pomocí ovladače přejděte na položku **Zpět** a stisknutím ovladače se vraťte.

## Výběr intenzity a času


Jakmile vyberete jeden z přednastavených programů, lze upravit **Intenzitu** (sílu magnetického pole) a **Čas** (délku relace).

Přednastavené programy jsou dodávány s již předem načtenou doporučenou intenzitou a časem. Ty se zobrazí při každém použití zařízení. Tyto lze v případě potřeby změnit.

Chcete-li změnit přednastavenou intenzitu, pomocí ovladače zvýrazněte **"Intenzity"**. Stisknutím ovládacího voliče otevřete obrazovku nastavení.



Otočením ovladače upravte intenzitu podle potřeby. Stiskněte ovladač pro potvrzení.

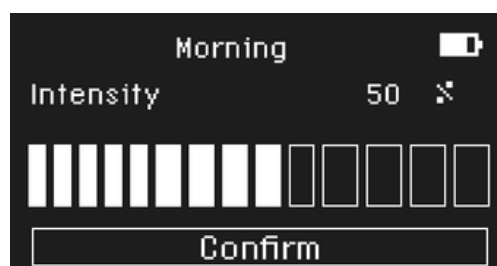

Nastavení	CELLER8® Mat	CELLER8®
2 %	1 Gauss/ 100 $\mu$ T	2 Gauss/ 200 $\mu$ T
4 %	2 Gauss/ 200 $\mu$ T	4 Gauss/ 400 $\mu$ T
10 %	5 Gauss/ 500 $\mu$ T	10 Gauss/ 1 000 $\mu$ T
20 %	10 Gauss/ 1 000 $\mu$ T	20 Gauss/ 2 000 $\mu$ T
40 %	20 Gauss/ 2 000 $\mu$ T	40 Gauss/ 4 000 $\mu$ T
60 %	30 Gauss/ 3 000 $\mu$ T	60 Gauss/ 6 000 $\mu$ T
80 %	40 Gauss	80 Gauss/ 8 000 $\mu$ T
100 %	50 Gaussů/ 5 000 $\mu$ T	100 Gauss/ 10 000 $\mu$ T


Lokalizovaný CELLER8® bude dosahovat intenzit až 100 Gaussů (10 000 Microtesla).

Celotělová podložka CELLER8® bude dosahovat intenzit až 50 Gaussů (5 000 Mikrottesla).

Chcete-li změnit čas, pomocí ovladače zvýrazněte **“Time”**. Stisknutím ovládacího voliče otevřete obrazovku nastavení.




Otočením kolečka ovladače upravte čas podle potřeby. Stiskněte ovladač pro potvrzení.

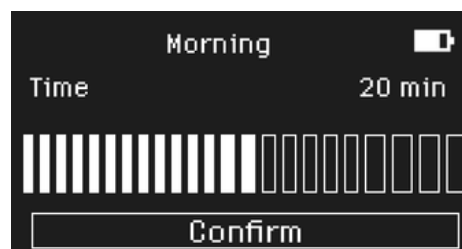

Pokud jsou upraveny přednastavené hodnoty **Intensity** a/nebo **Time**, objeví se tato obrazovka s novými hodnotami.

Chcete-li spustit program, ujistěte se, že je pomocí ovladače zvýrazněno **“Start”**, a stisknutím ovladače spustíte program.

Chcete-li provést jakékoli změny, zvýrazněte tlačítko **“Back”** a stisknutím ovladače se vraťte o krok zpět.

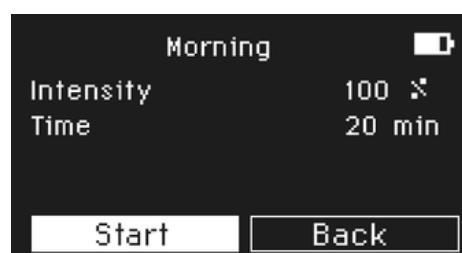

**POZNÁMKA:** Žádné změny přednastavených programů nebudou zapamatovány po vypnutí zařízení.



Po spuštění programu se na obrazovce objeví informace o běžícím programu. Vybraný program se objeví v horní části obrazovky a časovač začne odpočítávat.



Tato obrazovka po 15 sekundách ztmavne jako funkce úspory energie.

Chcete-li program pozastavit, stiskněte ovladač; stiskněte jednou, pokud je obrazovka aktivní, nebo dvakrát, pokud je obrazovka ztmavená. Zobrazí se výzva s možností zastavit nebo obnovit program. Má-li být program po přestávce obnoven, použijte ovladač pro zvýraznění políčka **Resume** a ovladač pro obnovení aktuální relace.

Chcete-li program předčasně ukončit, ujistěte se, že je zvýrazněno **Stop**, a stisknutím ovládacího kolečka ukončete aktuální relaci a zařízení se vrátí na obrazovku nabídky.

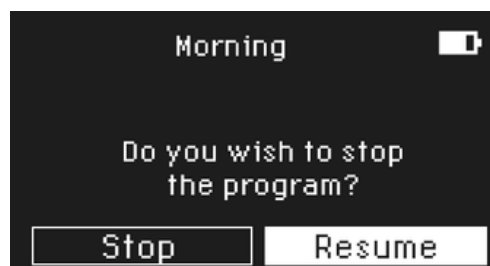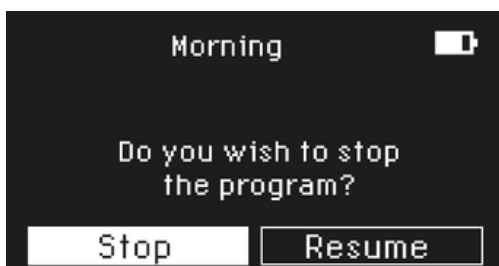

Jakmile skončí relace PEMF, relaci uzavře krátká animace. Pokud je v nastavení aktivován zvuk, ozve se také bzučák. Zařízení se poté automaticky vypne.

**POZNÁMKA:** Na konci relace s nočním programem se nepřehraje zvuk, aby se omezilo rušení uživatele.

# Vytvoření vlastního programu

Vytvoření vlastního programu je podobné jako při změně parametrů v přednastavených programech, ale vlastní program spustí pouze jednu frekvenci, která byla zvolena pro celou relaci.

**POZNÁMKA:** Pokud je během vlastního programu frekvence nastavena na 40 Hz a vyšší, ujistěte se, že CELLER8® je zapojen do elektrické sítě, protože **samotná baterie nemůže podporovat vyšší frekvence**.

Po výběru režimu aplikace z nabídky aplikací vyberte z nabídky programů vlastní program "Custom".

Pomocí vlastního programu lze přizpůsobit intenzitu, čas a frekvenci.

Chcete-li změnit parametr, zvýrazněte jej pomocí otočného ovladače a poté otočným ovladačem otevřete obrazovku nastavení. Otočením ovladače upravte čas podle potřeby. Stiskněte ovladač pro potvrzení.

Jakmile jsou parametry pro uživatelský program vytvořeny a potvrzeny, objeví se obrazovka s novými hodnotami.




**POZNÁMKA:** Jakékoli změny provedené ve vlastním programu se uloží do paměti zařízení jako naposledy použitý vlastní program a zůstanou zachovány i po vypnutí zařízení.

Stejně jako u přednastavených programů se na obrazovce zobrazí informace o právě probíhajícím programu.

Vybraný program se objeví v horní části obrazovky a časovač začne odpočítávat. V levé části obrazovky se objeví animace těla k dobití.

Tato obrazovka po 15 sekundách ztmavne jako funkce úspory energie.

Jakmile skončí relace PEMF, relaci uzavře krátká animace. Pokud je v nastavení aktivován zvuk, ozve se také bzučák. Zařízení se poté automaticky vypne.

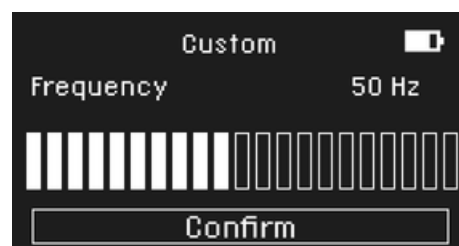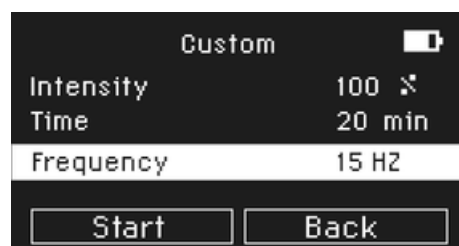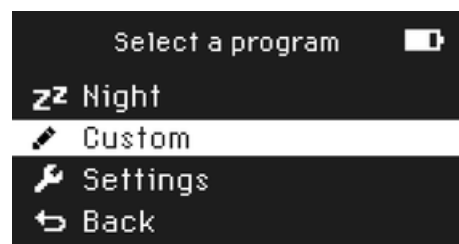


# Nastavení menu

V nabídce **Program** pomocí ovladače přejděte do nabídky **Nastavení**.

Stisknutím na ovladači otevřete nabídku **Nastavení**.

V nabídce Nastavení lze **povolit/zakázat zvuk** a **změnit polaritu** produktů CELLER8®.

Nabídka Nastavení také zobrazuje **aktuální verzi firmwaru**.

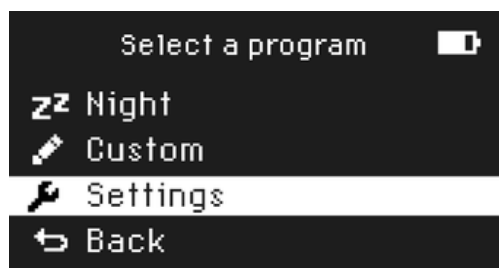

## Zapnutí / vypnutí zvuku


Pomocí ovladače zvýrazněte položku zvuk "**Sound**".

Stisknutím ovládacího voliče zapnete/vypnete zvuk.

Když je zvuk vypnutý, na konci relace PEMF se **nepřehraje žádný zvuk**, který by signalizoval uživateli, že program skončil.

Pomocí ovladače přejděte na položku Potvrdit (**Confirm**) a stisknutím ovladače uložte změny.

Tyto změny budou zapamatovány.

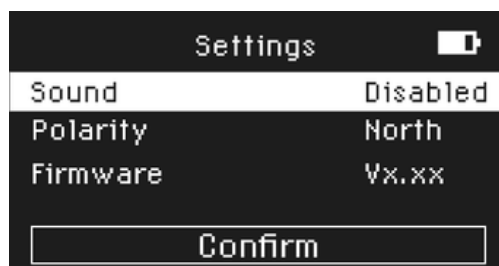

## Změna polarity

Změna polarity magnetických polí v nabídce Nastavení změní směr magnetického pole kolem podložky.

Pro polaritu jsou k dispozici 3 možnosti; Sever, Jih a Alt (střídavě).

Standardně je zadní strana CELLER8® nastavena na sever.




## Změna polarity

Změna polarity magnetických polí v nabídce Nastavení změní směr magnetického pole kolem podložky. Pro polaritu jsou k dispozici 3 možnosti; Sever, Jih a Alt (střídavě).

Standardně je zadní strana CELLER8® nastavena na sever.



Při použití podložky CELLER8® je šedá strana podložky CELLER8® standardně nastavena na sever.

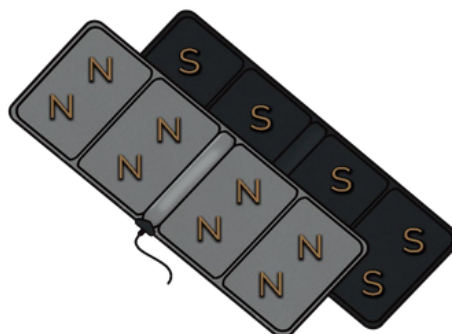


Chcete-li změnit polaritu, v nabídce Nastavení pomocí ovladače zvýrazněte **Polarity** a stisknutím ovladače změňte polaritu.

Pomocí ovladače přejděte na položku Potvrdit (**Confirm**) a stisknutím ovladače uložte změny.



Když je polarita přepnuta na jih, zadní strana CELLER8® bude jižní.

Když je polarita přepnuta na jih, bude šedá strana podložky CELLER8® jih.

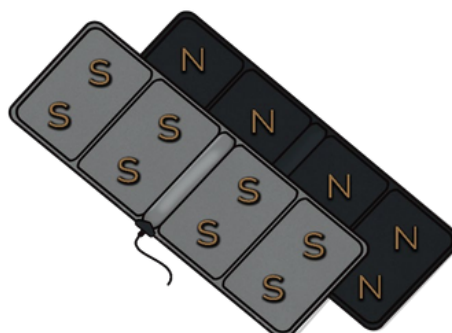

Když je polarita nastavena na Alt (střídavě), polarita v podložce CELLER8® se každou minutu přepne mezi severem a jihem, přičemž se bude střídat z obou stran podložky CELLER8®.

**POZNÁMKA:** Nastavení polarity, ve kterém byl CELLER8® naposledy použit před vypnutím zařízení, bude platit při příštím zapnutí zařízení zůstanou na místě.

# O programech Celler8®

CELLER8® má na výběr 4 přednastavené programy:

- Ranní
- Večerní
- Meditační
- Noční

Případně se můžete rozhodnout pro vlastní program ("Custom").

## **Ranní program (12 Hz až 30 Hz, zvyšování každých 5 sekund)**

Ranní program využívá řadu frekvencí speciálně pro aplikaci v dřívější části dne. Frekvence se každých 5 sekund zvýší o 1 Hz, což bude mít v jedné relaci dobrý rozsah různých frekvencí.

Ranní program byl navržen tak, aby pomohl s bdělostí, koncentrací, soustředěním a zotavením.

## **Večerní program (8 Hz & 10 Hz, zvyšování každou minutu)**

Večerní program běží 8 Hz a 10 Hz, střídá se každou minutu.

Večerní program je určen pro relaxaci, regeneraci nebo jako přírodní wellness program.

## **Meditační program (od 8 Hz do 4 Hz, snížení každých 30 sekund)**

Meditační program běží od 8 Hz a každých 30 sekund klesá, dokud nedosáhne 4 Hz. Po 30 sekundách se frekvence vrátí na 8 Hz a proces se bude opakovat až do konce relace.

Meditační program byl navržen tak, aby pomohl nalézt velmi uvolněný stav mysli, podobný tomu v hluboké meditaci.

## **Noční program (od 4 Hz do 1 Hz, snížení více než 10 minut)**

Noční program běží od 4 Hz a během 10 minut se sníží na 1 Hz. Po 10 minutách se frekvence vrátí na 4 Hz a proces se bude opakovat až do konce relace.

Noční program byl navržen pro použití před spaním. V tomto režimu jej lze využít až 12 hodin, ale ve výchozím nastavení je nastaveno na 2 hodiny. Světla zařízení v tomto režimu ztlumí a zvuk bude deaktivován, i když je na CELLER8® zvuk vybrán jako povolený. Je to proto, aby zařízení neprobudilo uživatele, když program skončí.

## **Vlastní program (1 Hz – 100 Hz)**

Vlastní program poběží pouze na zvolené frekvenci po dobu trvání zvoleného času/intenzity. Frekvenční rozsah na výběr je mezi 1 – 100 Hz.

# Péče a údržba zařízení

## Čištění produktů Celler8®

**POZOR:** Produkty CELLER8® by se měly otřít pouze neabrazivním hadříkem. Použití čisticích technik nebo produktů neschválených výrobcem může vést ke ztrátě výkonu a poškození podložky CELLER8® nebo CELLER8®.

**POZOR:** Za žádných okolností nesmí být podložka CELLER8® nebo CELLER8® ponořena nebo postříkána kapalinou.

## Skladování produktů Celler8®

Vždy skladujte CELLER8® na chladném a suchém místě.

**POZOR:** Nikdy neskladujte podložku CELLER8® nebo CELLER8® ve vozidle za velmi chladného nebo horkého počasí. Viz technické specifikace pro rozsahy skladovacích teplot a vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy neskladujte CELLER8® delší dobu s vybitou baterií.

# Odstraňování problémů

## Programy neběží podle očekávání

Pokud se při provozu CELLER8® vyskytne problém, nejprve zařízení vypněte a poté znovu zapněte. To umožní, aby se programování restartovalo a samo se resetovalo. Dále se ujistěte, že je zařízení dostatečně nabité.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým zákaznické péče CELLER8®.

## Výstražné obrazovky

### Nabíjení baterie

Když je CELLER8® vypnutý a zapojený do sítě, na obrazovce se zobrazí animovaná baterie, která značí, že se baterie nabíjí.



### Vybitá baterie


Obrazovka Slabá baterie se zobrazí, když zařízení nemá dostatek baterie pro provoz. V tomto případě musí být zařízení před použitím nabito na dostatečné množství.



Pokud tento problém přetrvává, kontaktujte tým CELLER8® Customer Care Team.

### Mat Not Detected

Obrazovka "Mat Not Detected" se zobrazí, když byla před připojením CELLER8® podložky vybrána aplikace využívající CELLER8® "Mat". Pro výběr aplikace se ujistěte, že je podložka CELLER8® připojena.

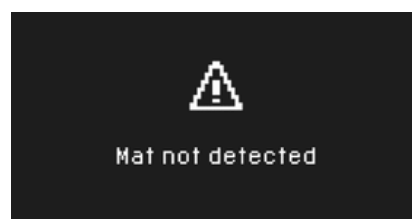

Tato obrazovka se také může zobrazit, pokud připojení není zabezpečené. Odpojte prosím podložku CELLER8® a znovu ji připojte.


Pokud podložka CELLER8® stále není detekována, zkuste prosím CELLER8® vypnout a znovu zapnout, abyste resetovali programování.

Pokud tento problém přetrvává, kontaktujte tým CELLER8® Customer Care Team.

# Technické informace Celler8®

## Umístění podložky Celler8® a Celler8®

CELLER8® a Celler8® Mat se skládají z měděných cívek, které generují magnetické pole. K nabuzení cívkou k vytvoření pulzního elektromagnetického pole se používá frekvenční generátor. 1 velkou měděnou cívkou lze nalézt v Celler8® a 12 měděných cívek lze nalézt v Celler8® Mat, aby bylo zajištěno nejlepší pokrytí magnetických polí.

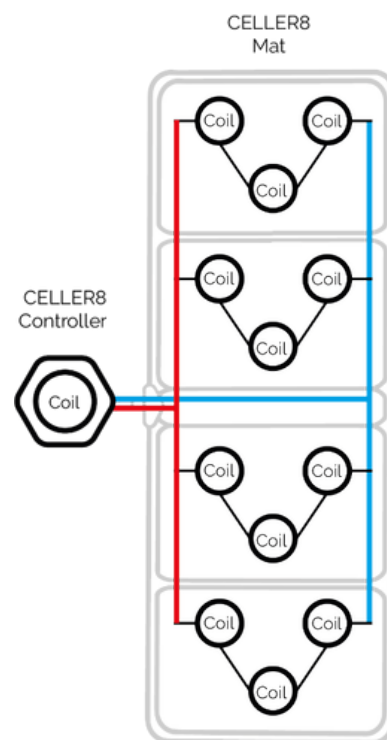

## Technické specifikace Celler8® + Celler8® podložky

<b>Rozsah intenzity</b>	1 G - 100 G (Gauss) 0,1 mT - 10 mT (Milli-Tesla) 100 $\mu$ T - 10 000 $\mu$ T (Micro-Tesla)
<b>Frekvenční rozsah</b>	1 – 100 Hz
<b>Programy</b>	5 (včetně Custom)
<b>Aplikace</b>	CELLER8® Mat, Celler8® a Celler8® + Celler8® Mat
<b>Počet cívek</b>	CELLER8®: 1 CELLER8® Mat: 12
<b>Polarita</b>	Sever, Jih a střídání (volitelné uživatelem)
<b>Průběh</b>	Čtvercová vlna
<b>Záruka</b>	CELLER8®: 3 roky CELLER8® Mat: 1 rok
<b>Zdroj napájení</b>	Provoz na baterie a síť
<b>Rozměry</b>	CELLER8®: 14 cm x 14 cm x 4 cm CELLER8® Mat: 49 cm x 173 cm x 2 cm
<b>Modely a číslo dílu</b>	CELLER8






















## Technické specifikace Celler8® + Celler8® podložky

<b>Doba provozu</b>	<b>CELLER8®</b>	420 minut při spuštění ranního programu 44 hodin při spuštění nočního programu (Při provozu s plnou baterií a spuštění programu na CELLER8® při výchozí intenzitě).
	<b>CELLER8® a CELLER8® Mat</b>	100 minut při spuštění ranního programu 36 hodin při spuštění nočního programu (Při provozu s plnou baterií a spuštění programu na podložce CELLER8® i CELLER8® s výchozí intenzitou).
<b>Kompletní doba nabíjení baterie</b>		< 5 hodin
<b>CELLER8® Pohotovostní doba, když se nepoužívá</b>		> 1 rok
<b>Operátor</b>		Koncový uživatel
<b>Provozní teplota</b>		15 °C – 35 °C (59 °F – 95 °F)
<b>Provozní vlhkost</b>		20 - 80 % RH (bez kondenzace)
<b>Skladovací a přepravní teplota</b>		0 – 50 °C (32 °F – 122 °F)
<b>Skladování a přeprava Vlhkost</b>		10 - 95 % RH (bez kondenzace)
<b>Hmotnost</b>		CELLER8®: 240 g Napájení: 160 g CELLER8® Mat: 3,75 kg
<b>Nabíjecí baterie</b>		RRC1120 Li-ion 3,6 v 2,35 aH
<b>Externí napájecí zdroj</b>		XP Power VEP24US24 Vstup: 100 - 240 V – 0,6 A, 50 / 60 Hz Výstup: 24 V – 1,0 A  XP Power ACM24US24 Vstup: 100 – 240 vAC < 0,6 A, 50 / 60 Hz Výstup: 24 v DC > 1,0 A
















## Technické specifikace popruhu CELLER8®

<b>Materiály</b>	Nylon Multi_lament 25 % Nylon Mono_lament 50 % Elastan 25 %
<b>Rozměry</b>	100 cm x 7,5 cm
<b>Hmotnost</b>	65 g

# Seznam symbolů Celler8®

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Zpět		CELLER8® program
	Baterie		Baterie je plná
	Baterie je prázdná		Baterie je prázdná
	Šestihran CELLER8®		Meditační program
	Vlastní program		Ranní program
	Večerní program		Noční program
	CELLER8® Podložka + CELLER8® program		CELLER8® Podložka program
	Podložka nebyla nalezena		Procento
	Severní polarita		Jižní polarita
	Probíhá program		Program dokončen
	Nastavení		

# Seznam symbolů na obalu

Symbol	Popis
	Výrobce
<b>IPX0 – nechráněno proti vniknutí vody</b>	IPX0 – není chráněno proti vniknutí vody
	Stejnoseměrný proud
	Značka CE
	Uchovávejte v suchu
	Před použitím si přečtěte pokyny
	Sériové číslo
	UDI číslo
	Likvidujte podle OEEZ
	Spotřebič třídy III pro použití se samostatným externím napájecím zdrojem s velmi nízkým napětím
	Logo výrobce
	Distribováno logem
	Obecný symbol pro obnovu/recyklovatelnost
	UKCA
	Omezení vlhkosti
	Teplotní limit

# Informace o záruce a vrácení

Na zařízení CELLER8® se poskytuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 3 let pro CELLER8® a 1 rok pro CELLER8® Mat, počínaje datem nákupu, při běžném používání. Tato záruka platí výhradně pro původního kupujícího, pokud byl produkt zakoupen přímo prostřednictvím CELLER8® nebo u autorizované pobočky, distributora či prodejce CELLER8®.

Pokud se domníváte, že je produkt v záruční době vadný, kontaktujte tým zákaznické podpory CELLER8® nebo místního autorizovaného distributora či prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

CELLER8® si vyhrazuje právo posoudit, zda je produkt vadný a má nárok na záruční výměnu, a v takovém případě nahradit vadný produkt nejvíce srovnatelným, aktuálně dostupným modelem. K uplatnění záruky je nutné předložit doklad o platném nákupu. Podmínky služby a podrobné informace o záruce najdete na webových stránkách CELLER8® na adrese [www.celler8.com](http://www.celler8.com).

Pro získání správné zpáteční adresy se obraťte na autorizovaného prodejce, u kterého jste zařízení CELLER8® zakoupili. Zařízení vrácená přímo na adresu výrobce se mohou ztratit a tím zanikne možnost přiřazení reklamace ke konkrétnímu zákazníkovi, proto je nutné nejprve kontaktovat prodejce, kde jste zařízení zakoupili, a získat správnou zpáteční adresu.

Zlikvidujte zařízení CELLER8® v souladu se směrnicí WEEE. Nikdy nevyhazujte žádná elektronická zařízení nebo baterie do běžného komunálního odpadu. Na konci životnosti produktu kontaktujte tým zákaznické podpory CELLER8® nebo jeho distributora pro pokyny k likvidaci.



# Odpovědný výrobce a kontakty

Pro podporu a opravy pro CELLER8® kontaktujte místního distributora.

## **Kontaktní údaje:**

Telefon: +44 (0) 1622  
854864

E-mail: [office@celler8.com](mailto:office@celler8.com)

Web: [www.celler8.com](http://www.celler8.com)

Distribuce: NewMed Ltd

Station Yard, Station

Road, Harrietsham,

Maidstone, Kent,

ME17 1JA

Spojené království

[www.newmedltd.co.uk](http://www.newmedltd.co.uk)

[info@newmedltd.co.uk](mailto:info@newmedltd.co.uk)

0808 1689 282

Výrobce Bedfont® Scientific Ltd.

Station Yard, Station Road,

Harrietsham,

Maidstone, Kent,

ME17 1JA

Spojené království

[www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

[ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com)

0044 (0)1622 851122

CELLER ®

Výhradní distributor pro ČR

**bloominds**®

[www.bloominds.cz](http://www.bloominds.cz)

+420 602 491 591

[lounge@bloominds.cz](mailto:lounge@bloominds.cz)

Na Perštýně 342/1  
110 00 Praha 1