

bloominds®

Luxuryade PEMF polštář



Základní popis produktu

Luxuryade PEMF polštář je multifunkční terapeutické zařízení určené pro lokální použití v oblasti:

- krční páteře
- ramen
- šíje
- horní části zad
- hlavy

Zařízení kombinuje několik moderních technologií v jednom:

1. PEMF (pulzní elektromagnetické pole)
2. Infračervené teplo (FIR)
3. TENS (elektrická nervová stimulace)
4. Světelnou terapii (LED / infračervené světlo)

Polštář je navržen pro cílenou relaxaci, regeneraci a podporu celkového komfortu při odpočinku nebo spánku.

Použité technologie

PEMF – pulzní elektromagnetické pole

PEMF pracuje s nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem, které působí na úrovni buněk. Polštář nabízí 9 frekvenčních programů, z nichž každý má odlišné zaměření:

Program	Frekvence	Zaměření
P1	3 Hz	Hluboký spánek, regenerace
P2	7,83 Hz	Schumannova rezonance – uvolnění
P3	10 Hz	Zklidnění, snížení stresu
P4	25 Hz	Bdělost, energie
P5	40 Hz	Soustředění, paměť
P6	48 Hz	Buněčná aktivita
P7	56 Hz	Prokrvení
P8	64 Hz	Hluboká regenerace
P9	Mix	Střídání všech programů

Infračervená tepelná terapie (FIR)

Polštář využívá dálkové infračervené záření (4–14 μm) v kombinaci s regulovatelným teplem (cca 30–70 °C).

Deklarované účinky:

- uvolnění svalů
- podpora prokrvení
- pocení a relaxace
- pocit zahřátí do hloubky

Infračervené teplo je emitováno také zahříványými minerály / kameny v podložce

TENS – elektrická nervová stimulace

TENS využívá nízkourovňové elektrické impulzy, které jsou přenášeny přes elektrody na kůži.

Základní pocity při použití:

- jemné brnění
- pulzování
- stahy svalů

⚠ TENS NEPOUŽÍVEJTE, pokud:

- máte kardiostimulátor nebo implantát
- jste těhotná
- máte epilepsii
- máte otevřené rány, zánět nebo infekci kůže

TENS nepoužívejte na hlavu, krk, obličej ani při spánku či koupání.

Světelná terapie

Polštář obsahuje kombinaci:

- červeného světla (660 nm)
- blízkého infračerveného světla (850 nm)

Výrobce popisované využití:

- péče o pokožku
- regenerace
- podpora uvolnění

Světelná terapie je doplňková funkce a může běžet současně s teplem nebo PEMF

Hlavní benefity

Hlavní benefity polštáře


- cílená úleva v oblasti krční páteře
- uvolnění napětí v oblasti ramen a šíje
- podpora klidného spánku
- zmírnění bolestí hlavy spojených se stresem
- snížení svalové ztuhlosti
- podpora relaxace po náročném dni

Ergonomický tvar polštáře umožňuje přesné zaměření terapie na problematickou oblast těla.

Synergie přírody a špičkové technologie

- 1.7 krystalů pro harmonii čakr: Obsahuje Amethyst, Sodalit, Modrý krajkový achát, Zelený achát, Žlutý avanturín, Karneol a Červený jaspis, které po zahřátí emitují dálkové infračervené záření (FIR).
2. Dálkové infračervené záření (FIR): Teplo pronikající hluboko do tkání pro uvolnění ztuhlých svalů a podporu metabolismu.
- 3.8 úrovní PEMF terapie: Nastavitelné frekvence od 3 Hz pro opravu těla a hluboký spánek až po 64 Hz pro hloubkovou regeneraci vnitřních orgánů.
4. Terapie zápornými ionty: Pomáhá neutralizovat dopady elektromagnetického smogu a navozuje vnitřní klid.

- Amethyst: Klid a hluboký spánek.
- Sodalit: Logika a vnitřní mír.
- Modrý krajkový achát: Komunikace a vyjádření.
- Zelený achát: Rovnováha a léčení.
- Žlutý avanturín: Sebevědomí a prosperita.
- Karneol: Vitalita a kreativita.
- Červený jaspis: Uzemnění a stabilita.

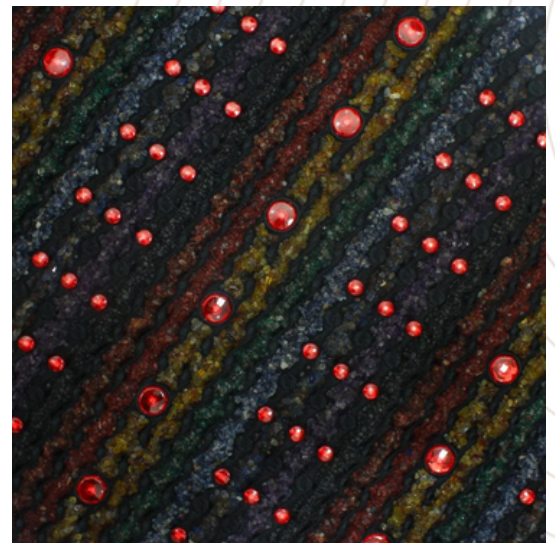

Doporučené používání

Relaxace krční páteře

Teplota: 35–45 °C

PEMF: P2 nebo P3

Doba: 20–30 minut

Bolesti hlavy / napětí šíje

Teplota: 40–50 °C

PEMF: P3

Doba: 20–40 minut

Podpora spánku

Teplota: 30–35 °C

PEMF: P1

Časovač: dle potřeby

Použití je možné 1–2× denně.

Technické specifikace

- Rozměry: cca 50 × 20 × 10 cm
- PEMF frekvence: 3–64 Hz
- Počet PEMF cívek: 1
- FIR spektrum: 4–14 μm
- LED světla: cca 28 ks
- Teplota: 30–70 °C
- Časovač: 1–12 hodin



Návod k použití dálkového ovladače



MCU-2 Controller

Upozornění a kontraindikace

Upozornění

1. Polštář používejte na rovném povrchu. Ideální je postel, podlaha nebo masážní lehátko.
2. Pokud pás přikrýváte, musí být zakrytý celý její povrch.
! Nikdy nezakrývejte jen část polštáře, může to způsobit nesprávnou funkci tepelných senzorů.
3. Nepokládejte žádné předměty na podložku během zahřívání, zejména ovladač. Může dojít k nerovnoměrnému zahřívání a poškození podložky nebo položeného předmětu.
4. Nepokoušejte se polštář ani ovladač rozebírat nebo otevírat.
V případě problému nás nejprve kontaktujte.
5. Dostatečně pijte vodu – před i po použití podložky.
6. Těhotné ženy, kojící ženy a osoby s kardiostimulátorem by neměly být vystaveny zvýšenému teple z podložky.
7. PEMF terapie není vhodná pro těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem.
8. Před složením a uložením polštáře ji vždy zcela vypněte a odpojte ze zásuvky.
9. Neponořujte do vody.
10. Polštář je vhodný pro osoby všech věkových kategorií, včetně dětí.
Využívat je mohou i domácí mazlíčci.

Často kladené dotazy

Jaké jsou hlavní terapeutické prvky polštáře?

Polštář kombinuje 7 drahých kamenů (FIR teplo) pro harmonizaci čakr, 8 úrovní PEMF terapie (3–64 Hz) pro hloubkovou buněčnou obnovu, TENS elektrostimulaci pro okamžitou úlevu od bolesti svalů a fotonovou terapii s produkcí záporných iontů pro snížení stresu.

Pro koho je polštář nejvhodnější?

Polštář je ideální pro ty, kteří trpí chronickým napětím a bolestí v oblasti krku, šíje a ramen, pro lidi se spánkovými problémy nebo ty, kteří často zažívají bolesti hlavy spojené se stresem a ztuhlostí. Jeho cílené teplo je perfektní pro tuto oblast.

Jak dlouho a jak často bych měl polštář používat?

Doporučené sezení obvykle trvá 15 až 30 minut, ale polštář je bezpečný i pro delší používání (např. během spánku na nižší teplotu). Pro nejlepší výsledky se doporučuje používat jej denně k udržení svalové relaxace a stability.

K čemu slouží 7 různých krystalů v polštáři?

Každý krystal odpovídá jedné z 7 čakr a pomáhá k jejich harmonizaci. Po zahřátí tyto krystaly přirozeně emitují dálkové infračervené teplo, které proniká hluboko do těla a podporuje metabolismus.

Lze nastavit teplotu a jak horký polštář je?

Ano, polštář je dodáván s digitálním ovladačem, který umožňuje přesné nastavení teploty podle vašich preferencí a potřeb (obvykle od mírného tepla pro relaxaci až po vyšší teploty pro hlubokou svalovou úlevu). Můžete tak vždy zvolit optimální terapeutickou úroveň.

Technické specifikace

Velikost	cca 50 × 20 × 10 cm
PEMF	<ul style="list-style-type: none">• Frekvenční rozsah: 3–64 Hz• Počet PEMF cívek: 1• Intenzita: cca 270 Gauss (orientační hodnota)
FIR a photon světlo	<ul style="list-style-type: none">• Far-infrared (FIR) výhřevné spektrum: 4–14 μm (daleko-infračervené)• Photon LED světla: 660 nm (červené) + 850 nm (NIR)• Počet LED světel: cca 28 ks (12 viditelných + 16 NIR)
Teplotní a časové nastavení	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: 30 – 70 °C / 85 – 159 °F• Časovač: 1 – 12 h s automatickým vypnutím
Elektrické parametry	<ul style="list-style-type: none">• Vstupní napětí: 110–120 V a 220–240 V• Příkon: cca 55 W
Kameny / materiály	<ul style="list-style-type: none">• Přírodní krystaly: ametyst, sodalit, zelený aventurin, žlutý aventurin, červený jaspis, karneol atd.• Povrch: měkký a příjemný zdravotní materiál kompatibilní s tělem
Certifikace	EMF stínění, Class II elektrické normy, CE/FDA/RoHS



bloominds[®]

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

Rybná 1066/15
110 00 Praha 1