

bloominds®

# Beauty Glow Anti-aging Photon Therapy



# Co je 3D laserová LED maska

Jedná se o kompaktní zařízení pro domácí péči o pleť, které kombinuje světelnou terapii a ultrazvukovou mikro-vibraci pro podporu lepšího vzhledu pokožky. Zařízení využívá tři světelná spektra – modré světlo 460 nm, červené světlo 630 nm a blízké infračervené světlo 940 nm. Bloominds uvádí, že přístroj obsahuje 96 LED diod a je určen pro kosmetickou péči o pleť.

## K čemu je zařízení určeno

Přístroj je určen pro domácí kosmetickou péči o pleť. V jednotlivých režimech je vhodný zejména pro:

- podporu rozjasnění a sjednocení pleti
- péči o pleť se sklony k nedokonalostem
- podporu hladšího vzhledu pokožky
- péči o texturu pleti a celkový vzhled pokožky

## Světelná spektra

### Červené světlo 630 nm

Podporuje péči o vzhled pleti, její rozjasnění a hladší vzhled.

### Modré světlo 460 nm

Je vhodné pro péči o problematickou pleť a pokožku se sklony k nedokonalostem.

### Blízké infračervené světlo 940 nm

Doplňuje kosmetickou péči ve hlubších vrstvách pokožky a podporuje celkový komfort ošetření.

# Hlavní benefity

## **Podpora rozjasnění a sjednocení pleti**

Kombinace červeného, modrého a blízkého infračerveného světla je určena pro domácí kosmetickou péči o pleť a podporu svěžejšího vzhledu pokožky.

## **Péče o pleť se sklony k nedokonalostem**

Modré světlo 460 nm je na produktové stránce popsáno jako vhodné pro čištění pleti, zklidnění zánětlivých projevů a péči o aknézní pleť.

## **Podpora hladšího vzhledu pokožky**

Červené světlo 630 nm je spojováno s péčí o povrchovou texturu pleti, jas pleti a anti-aging rutinou.

## **Působení i ve hlubších vrstvách pleti**

Blízké infračervené světlo je světlo pracující v hlubších vrstvách, kde doplňuje péči o strukturu a regeneraci pokožky.

## **Kombinace světelné terapie a mikro-vibrace**

Zařízení kombinuje světelnou terapii a ultrazvukovou mikro-vibraci pro podporu kvality pokožky.

## **Přesnější cílená péče**

Oproti plošným maskám je tento typ zařízení určený pro cílené ošetření konkrétních oblastí obličeje. Zejména ergonomický tvar a možnost použití i na krk a dekolt

# Režimy péče

## Režim omlazení pleti

Kombinace červeného světla 630 nm a blízkého infračerveného světla 940 nm.

Režim je určen pro podporu hladšího, jasnějšího a svěžejšího vzhledu pleti.

Délka režimu: 8 minut

## Režim péče o problematickou pleť

Kombinace modrého světla 460 nm a blízkého infračerveného světla 940 nm.

Režim je určen pro péči o pleť se sklony k akné, mastnotě a viditelným nedokonalostem.

Délka režimu: 4 minuty

# Příprava před použitím

Před prvním použitím doporučujeme:

1. Vymout zařízení i příslušenství z obalu.
2. Zkontrolovat, zda přístroj ani příslušenství nejsou poškozené.
3. Uschovat obal pro případné skladování nebo přepravu.
4. Před prvním použitím zařízení plně nabít.

# Test citlivosti pokožky

Před prvním použitím proveďte test snášenlivosti.

1. Očistěte vnitřní stranu předloktí jemným čisticím přípravkem nebo mýdlem.
2. Osušte pokožku.
3. Přiložte zařízení na testovanou oblast přibližně na 3 minuty.
4. Sledujte reakci pokožky během testu a také po dobu následujících 24 hodin.

Pokud se objeví zarudnutí, pálení, svědění, vyrážka nebo jiná nepříjemná reakce, zařízení nepoužívejte.

# Jak zařízení používat

- Před použitím pleť důkladně odlíchte a vyčistěte.
- Pokožka musí být čistá, suchá a bez make-upu.
- Pro základní hydrataci je možné použít toner.
- Nepoužívejte před ošetřením přípravky s fotosenzitivními nebo výrazně bělícími složkami.
- Dlouhým stiskem tlačítka zařízení zapněte.
- Po zapnutí se aktivuje režim omlazení pleti.
- Dalším stiskem tlačítka přepnete mezi jednotlivými režimy.
- Přiložte hlavici k pokožce a pohybujte s ní plynule po ošetřované oblasti.

## Doporučené používání

- používejte podle potřeb své pleti
- při začátku používání sledujte reakci pokožky
- po adaptaci pleti lze zařízení zařadit pravidelně do rutiny
- režim omlazení pleti se automaticky ukončí po 8 minutách
- režim péče o problematickou pleť se automaticky ukončí po 4 minutách
- nepoužívejte zařízení déle než 40 minut denně

## Nabíjení

Zařízení se nabíjí pomocí magnetické základny a USB-C kabelu.

Postup nabíjení

1. Umístěte hlavní jednotku do magnetické nabíjecí základny.
2. Připojte USB-C kabel do nabíjecího portu.
3. Připojte kabel ke zdroji napájení.

Indikace nabíjení


- při nízkém stavu baterie kontrolka bliká červeně
- během nabíjení kontrolka bliká červeně
- po plném nabití svítí zeleně

## Čištění a údržba

- zařízení neoplachujte pod tekoucí vodou
- čistěte pouze jemným suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem
- nepoužívejte alkohol, aceton, benzín, odlakovače ani agresivní čisticí prostředky
- před čištěním vždy zařízení vypněte
- zařízení skladujte v suchu a mimo přímé slunce

# Obsah balení

- 1× hlavní jednotka
- 1× magnetická nabíjecí základna
- 1× USB-C nabíjecí kabel
- 1× uživatelský manuál

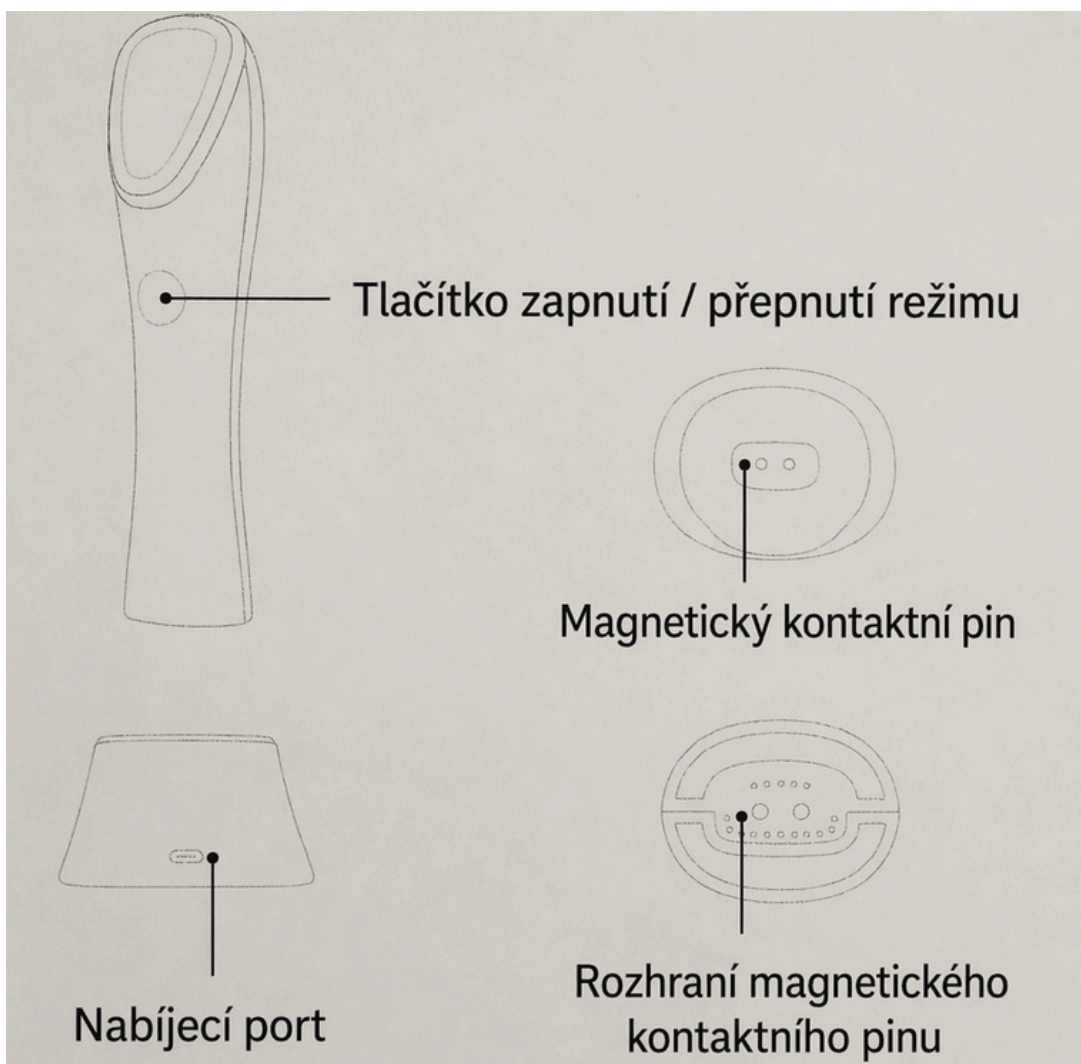

# Upozornění

Zařízení používejte pouze podle tohoto návodu.

Nepoužívejte zařízení:

- v koupelně, ve sprše nebo v blízkosti vody
- v blízkosti otevřeného ohně, topidel nebo jiných zdrojů vysoké teploty
- v blízkosti hořlavin, alkoholu, benzínu, ředidel nebo sprejů
- pokud je poškozené
- pokud spadlo a vykazuje známky poškození
- pokud je poškozený nabíjecí kabel nebo konektor

Dále dbejte na to, že:

- zařízení nesmí používat děti bez dozoru
- zařízení není určeno k jinému použití, než je kosmetická péče podle tohoto návodu
- nedívejte se přímo do LED světla
- zařízení nerozebírejte ani neupravujte
- nepokládejte zařízení na nestabilní povrch
- přístroj nesmí přijít do styku s vodou ani vysokou vlhkostí

Pokud během používání zaznamenáte:

- pálení
- silné začervenání
- svědění
- vyrážku
- neobvyklý zápach
- kouř
- neobvyklý zvuk

okamžitě přestaňte zařízení používat.

## Kdo by měl používání konzultovat s lékařem

Před použitím doporučujeme konzultaci s lékařem zejména v těchto případech:

- akutní onemocnění nebo infekce
- horečka nebo celkově zhoršený zdravotní stav
- kožní onemocnění
- výrazně citlivá nebo alergická pokožka
- autoimunitní onemocnění
- poruchy citlivosti
- těhotenství nebo kojení
- období krátce po chirurgickém zákroku
- kardiologické potíže
- výrazné zánětlivé projevy na pokožce

Zařízení nepoužívejte na poškozenou, poraněnou nebo silně podrážděnou pokožku.

# Technické informace

Počet LED diod	96 ks (32 x 3)
Materiál	PC + ABS
Vlnové délky	<ul style="list-style-type: none"><li>• červené světlo: 630 nm</li><li>• modré světlo: 460 nm</li><li>• infračervené světlo: 940 nm</li></ul>
Napětí	3,7 V
Výkon	7,4 W
Kapacita baterie	2500 mAh
Doba nabíjení	Doba nabíjení:
Doba provozu	cca 2,5 hodiny
Velikost produktu	245 mm
Hmotnost	277 g



**bloominds®**

**[www.bloominds.cz](http://www.bloominds.cz)**

**+420 602 491 591**

**[lounge@bloominds.cz](mailto:lounge@bloominds.cz)**

**Rybní 1066/15  
110 00 Praha 1**