


Červený panel Glow Slim pro krásnou pleť

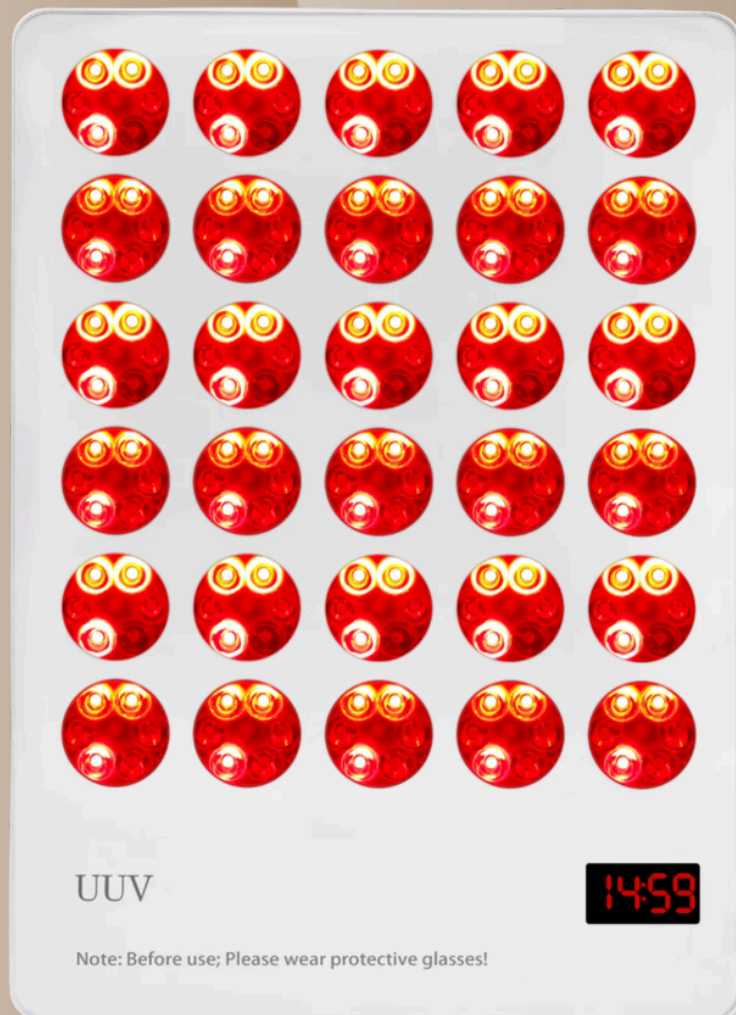

Červený panel Glow Slim pro krásnou pleť

Profesionální světelná terapie pro pleť, regeneraci i energii

Červený panel Glow Slim je moderní zařízení pro domácí fotobiomodulační terapii. Využívá kombinaci červeného a infračerveného světla, které působí na pokožku i hlubší tkáně a podporuje přirozené regenerační procesy v těle.

Technologie světelné terapie je založena na specifických vlnových délkách (zejména 660 nm a 850 nm), které podporují tvorbu kolagenu, regeneraci buněk a zlepšení cirkulace

K čemu je zařízení určeno

Panel je vhodný pro každodenní použití na obličej i tělo. Pomáhá podpořit:

- omlazení a rozjasnění pleti
- redukci vrásek a jemných linek
- regeneraci svalů a kloubů
- zmírnění zánětů a napětí
- podporu energie a vitality

Hlavní benefity

Omlazení pleti a tvorba kolagenu

Červené světlo stimuluje buněčnou aktivitu a podporuje tvorbu kolagenu, což vede k pevnější a hladší pleti.

Hlubková regenerace

Infračervené světlo proniká do hlubších vrstev tkání, kde podporuje regeneraci a zmírňuje svalové napětí.

Zlepšení cirkulace

Světelná terapie podporuje prokrvení a okysličení tkání, což přispívá k lepší regeneraci a zdraví pokožky.

Podpora energie a celkové vitality

Pravidelné používání může přispět ke zvýšení energie a celkové regeneraci organismu.

Hlavní funkce

Světelná terapie

- červené světlo (péče o pleť, anti-aging)
- infračervené světlo (hloubková regenerace)

Nastavení intenzity

- více úrovní intenzity dle potřeby

Časovač

- nastavení délky terapie (obvykle 5–20 minut)

Dotykové ovládání

- jednoduché a intuitivní použití

Jak zařízení používat

1. Umístěte panel na stabilní povrch nebo stojan.
2. Připojte zařízení do elektrické sítě.
3. Zapněte panel pomocí tlačítka.
4. Zvolte režim a intenzitu.
5. Nastavte čas terapie.
6. Umístěte panel ve vzdálenosti cca 10–30 cm od pokožky.
7. Po skončení se zařízení automaticky vypne.
8. Po použití zařízení vypněte a odpojte.

Doporučené používání

- 3–5× týdně
- 5–20 minut na jednu oblast
- používat na čistou pokožku
- dlouhodobé používání = nejlepší výsledky

Ovládání zařízení

Tlačítka

Start / Pauza

- krátké stisknutí
 - spuštění nebo pozastavení terapie
- podržení 3 sekundy
 - zapnutí nebo vypnutí zařízení

Čas

Krátkým stiskem prodloužíte terapii vždy o 5 minut.

Podržením tlačítka na 3 sekundy zapnete nebo vypnete zvukovou signalizaci.

Režim

Krátké stisknutí


→ přepínání mezi klasickými režimy D01–D10.

Podržení 3 sekundy

→ přepnutí na kombinované režimy MX1–MX6.

Pulzní režim

Slouží k zapnutí nebo vypnutí pulzního světla.

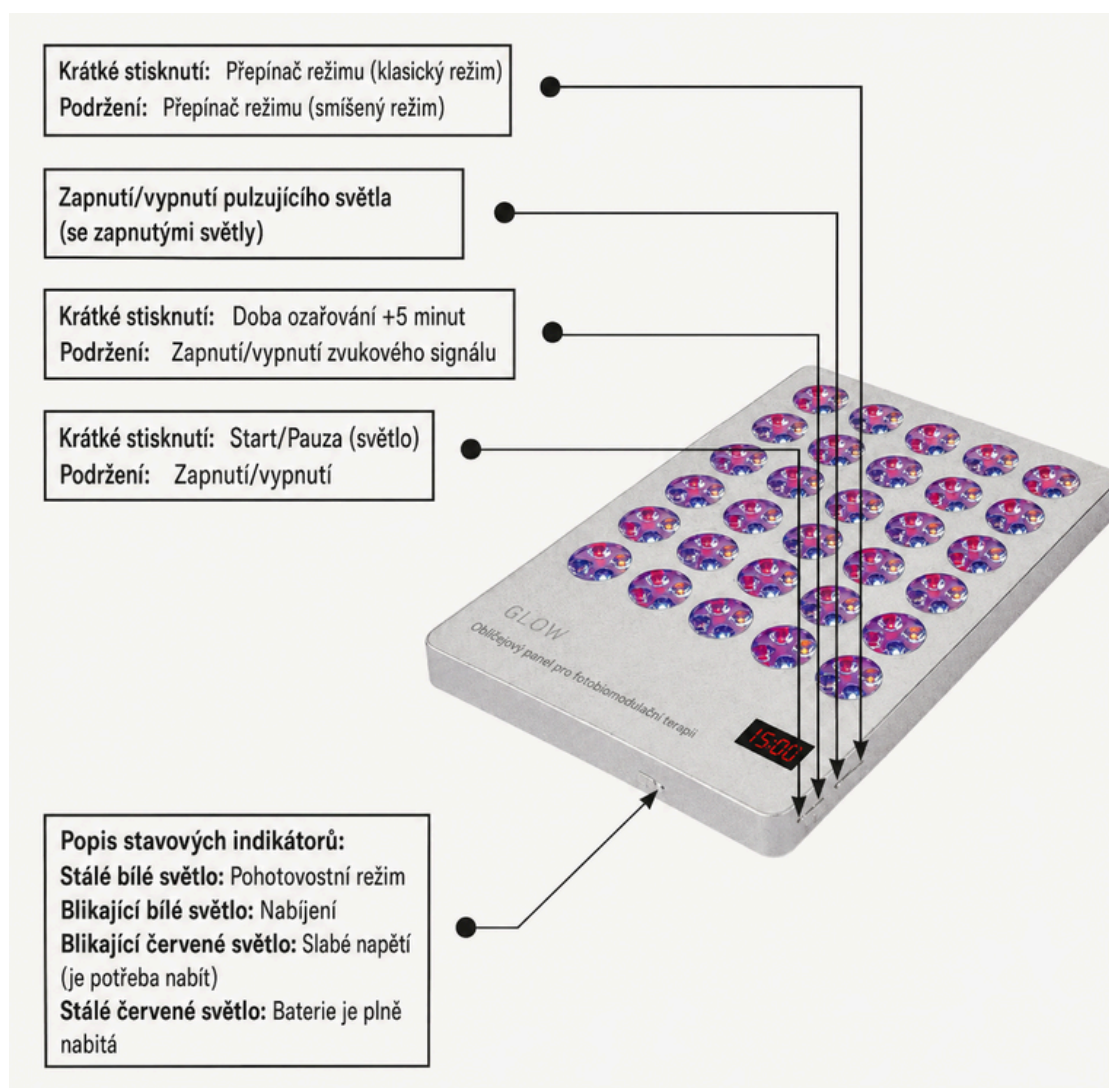

Světelné režimy

Režim	Světlo	Doporučené použití
D01	Červené 630 nm	omlazení pleti
D02	660 + 940 nm	regenerace
D03	Žluté 590 nm	citlivá pleť
D04	Modré 460 nm	akné
D05	Červené + infra	vrásky
D06	Červené + infra + modré	problematická pleť
D07	Červené + žluté	sjednocení tónu
D08	Červené + modré	akné + regenerace
D09	Červené + infra + modré	intenzivní péče
D10	Kompletní spektrum	komplexní péče

Obsah balení


- Glow Slim panel
- napájecí kabel
- ochranné brýle

Upozornění

- nedívejte se přímo do světla
- používejte ochranné brýle
- nepoužívejte v blízkosti vody
- nepoužívejte při poškození zařízení
- nepokládejte na nestabilní povrch
- nepoužívejte ve vlhkém prostředí
- při podráždění pokožky přerušete používání
- v případě zdravotních potíží konzultujte s lékařem
- zařízení není zdravotnický prostředek

Technické informace

Typ zařízení	<i>panel pro světelnou terapii</i>
Počet LED diod	<i>180 ks</i>
Intenzita záření	<i>70 mW/cm²</i>
Úhel svitu	<i>25°</i>
Režimy	<i>16 režimů (10 + 6 programů)</i>
Vstupní napětí	<i>AC 100–240 V</i>
Výstupní výkon	<i>≤ 30 W</i>
Příslušenství	<i>nabíjecí kabel, ochranné brýle, uživatelský manuál</i>

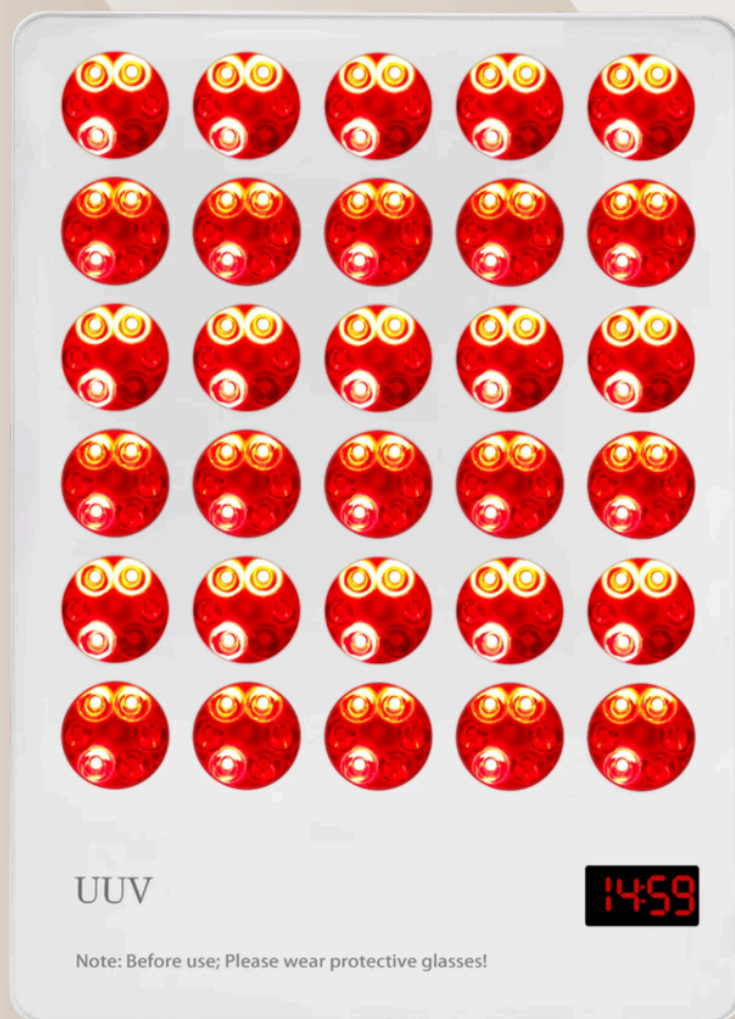

bloominds[®]

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**