


bloominds®

Bloominds D300 Desktop

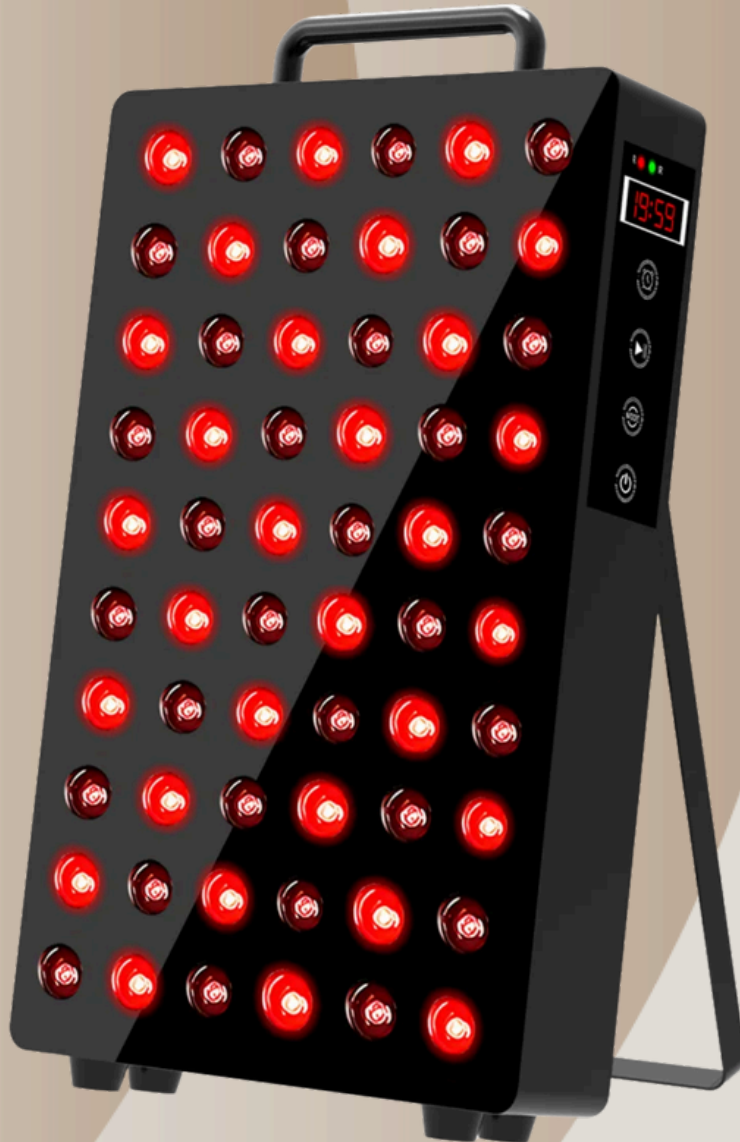

Co je Bloominds D300 Desktop

BBloominds D300 Desktop je kompaktní panel pro terapii červeným a blízkým infračerveným světlem (PBM – Photobiomodulation). Díky vysokému výkonu, dvěma klinicky ověřeným vlnovým délkám a jednoduchému ovládání umožňuje efektivní domácí terapii zaměřenou na regeneraci, podporu tvorby kolagenu, zmírnění bolesti a zlepšení vitality.

Panel je ideální pro ošetření obličeje, krku, zad, kloubů i dalších částí těla a díky stolnímu stojanu jej můžete pohodlně používat doma nebo v kanceláři.

Co je fotobiomodulace?

BFotobiomodulace (PBM) je neinvazivní metoda využívající červené a blízké infračervené světlo ke stimulaci buněk.

Na rozdíl od UV záření nepoškozuje pokožku ani nezpůsobuje přehřívání tkání. Světlo proniká do buněk, kde aktivuje mitochondrie – buněčné elektrárny – a podporuje tvorbu ATP (buněčné energie).

Vyšší produkce ATP přispívá k rychlejší regeneraci, lepšímu hojení, tvorbě kolagenu a správné funkci buněk.

Hlavní benefity

Pravidelné používání může podpořit:

- ✓ regeneraci svalů po fyzické aktivitě
- ✓ zmírnění bolesti svalů a kloubů
- ✓ tvorbu kolagenu
- ✓ zdravější vzhled pokožky
- ✓ rychlejší regeneraci tkání
- ✓ zlepšení mikrocirkulace
- ✓ buněčnou energii
- ✓ sportovní výkon
- ✓ celkovou vitalitu

Jak Bloominds D300 funguje

Červené světlo (630 nm + 660 nm)

Červené světlo působí především na povrchové vrstvy pokožky.

Podporuje:

- tvorbu kolagenu
- zlepšení elasticity pokožky
- sjednocení tónu pleti
- regeneraci pokožky
- zmírnění drobných vrásek

Blízké infračervené světlo (810 nm, 850 nm, 940 nm)

Blízké infračervené světlo proniká hluboko do svalů, šlach a kloubů.

Pomáhá:

- urychlit regeneraci svalů
- zmírnit bolest
- podpořit mikrocirkulaci
- zlepšit hojení
- snížit zánětlivé procesy

Hlavní přínosy

Při pravidelném používání může terapie přispět k:

- podpoře regenerace organismu
- zvýšení buněčné energie
- zlepšení kvality pokožky
- podpoře tvorby kolagenu
- zmírnění bolesti svalů a kloubů
- rychlejší regeneraci po sportu
- lepšímu prokrvení tkání
- podpoře vitality

Doporučené používání

Před prvním použitím

Začněte kratší terapií.

Doporučená délka:

- 2–3 minuty na jednu oblast během prvních dnů
- postupně prodlužujte na 10–15 minut během 2–3 týdnů

Běžné používání

- vzdálenost od panelu: 10–30 cm
- délka terapie: 10–15 minut
- maximálně 20 minut na jednu oblast
- 4–7× týdně
- mezi dvěma terapiemi stejné oblasti doporučujeme odstup alespoň 6 hodin.

Doporučené oblasti použití

Panel lze použít například na:

- obličej
- krk
- ramena
- záda
- lokty
- zápěstí
- kyčle
- kolena
- stehna
- lýtky
- chodidla

Ovládání panelu

Zapnutí

1. Připojte panel do elektrické sítě.
2. Stiskněte tlačítko Power.
3. Na displeji se rozsvítí časovač.

Nastavení času

Pomocí tlačítek Time + / Time – lze nastavit:

- 5 minut
- 10 minut
- 15 minut
- 20 minut
- 25 minut
- 30 minut

Po uplynutí nastaveného času se panel automaticky vypne.

Režimy světla

Pomocí tlačítka Mode lze přepínat mezi režimy:

Režim 1

Pouze červené světlo

630 nm + 660 nm

Vhodné především pro:

- pokožku
- tvorbu kolagenu
- vrásky
- akné
- pigmentaci

Režim 2

Pouze blízké infračervené světlo

810 nm + 850 nm + 940 nm

Vhodné zejména pro:

- svaly
- klouby
- šlachy
- hlubší regeneraci

Režim 3

Kombinace červeného i infračerveného světla.

Jedná se o nejčastěji používaný režim pro celkovou regeneraci.



Časté dotazy

Jak dlouho trvá, než uvidím výsledky?

Mnoho uživatelů pozoruje první změny během několika týdnů. Pro maximální efekt doporučujeme pravidelné používání po dobu alespoň 8–12 týdnů.

Mohu používat panel každý den?

Ano. Doporučuje se 10–20 minut na jednu oblast jednou denně.

Mohu používat panel přes oblečení?

Ne. Pro nejlepší účinek by měla být ošetřovaná oblast přímo vystavena světlu.

Musím používat ochranné brýle?

Ano, zejména pokud je panel používán v oblasti obličeje nebo pokud se díváte směrem k LED diodám.

Je zařízení zdravotnický prostředek?

Bloominds D300 Desktop je wellness zařízení určené k podpoře přirozených regeneračních procesů organismu. Nenahrazuje lékařskou péči ani není určeno k diagnostice nebo léčbě onemocnění.

Obsah balení

Balení obsahuje:


- Bloominds D300 Desktop
- napájecí kabel
- stojan
- ochranné brýle
- uživatelský manuál

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Nevystavujte panel vodě.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
- Nedívejte se přímo do LED diod bez ochranných brýlí.
- Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte na otevřené rány ani při akutním krvácení.
- V případě těhotenství nebo závažného zdravotního onemocnění konzultujte používání s lékařem.
- Nepřikrývejte větrací otvory panelu.

Technické informace

Váha	2,2 kg
Řada	D
Velikost	Desktop
Materiál	Plech
Použití	Imunita, Krása pleti, Regenerace a energie, Sport a klouby
Vlnové délky	4
Plocha ozáření	Celotělové
Ovládání	Displej

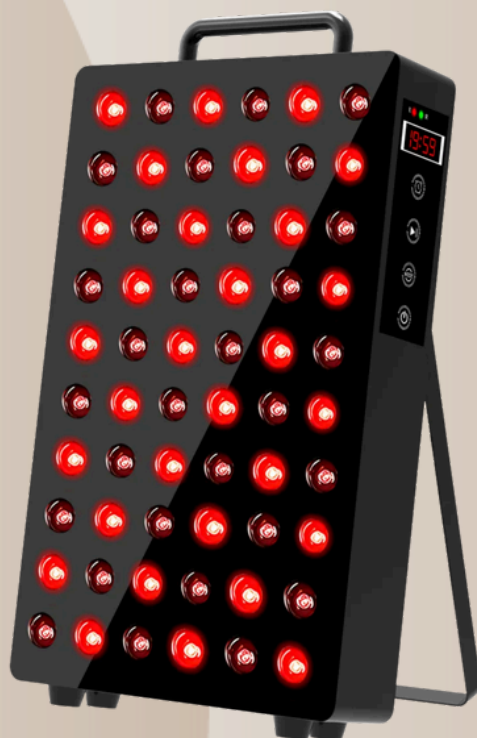

bloominds®

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**