


Beauty přístroj pro světelnou terapii

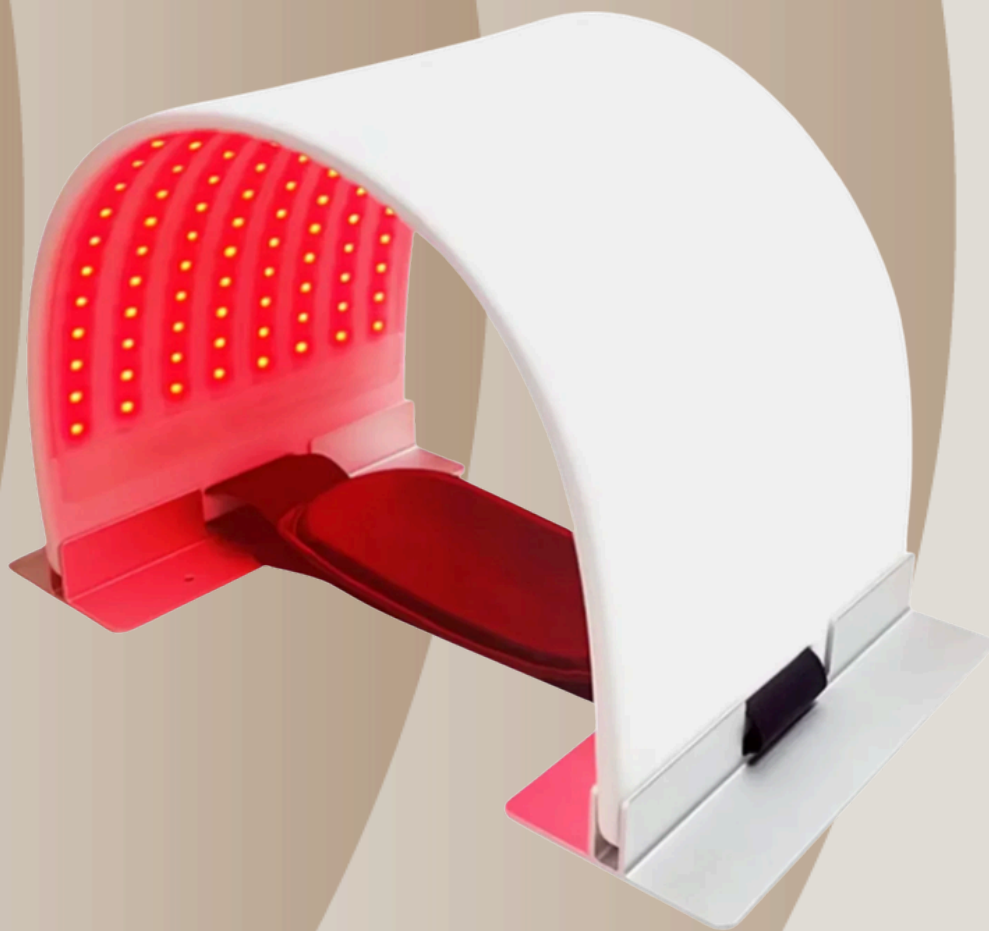

Co je Beauty přístroj pro světelnou terapii

Beauty přístroj pro světelnou terapii je LED chromoterapeutický dóm určený pro kosmetickou péči o obličej, krk, dekolt i další části těla. Přístroj využívá světelnou terapii v několika barevných režimech a blízké infračervené světlo pro podporu regenerace pokožky, vitality a relaxace. Produkt pracuje se 7 světelnými režimy a infračervenou terapií; na produktové stránce je uvedeno 240 LED diod a vlnové délky 660 nm pro červené světlo a 850 nm pro infračervené světlo.

Popis produktu

Beauty přístroj pro světelnou terapii je fototerapeutický LED tunel ve tvaru oblouku. Díky klenutému tvaru rovnoměrně obklopí ošetřovanou oblast a světlo může působit na pleť z více úhlů. Přístroj lze používat na obličej, krk, dekolt, břicho, záda, nohy nebo jiné části těla podle potřeby. Produktová stránka jej popisuje jako nekontaktní LED chromoterapeutický dóm vhodný pro obličej, krk, dekolt i tělo.

Zařízení kombinuje barevnou LED terapii a blízké infračervené světlo. Barevné režimy slouží pro různé typy kosmetické péče o pokožku, například zklidnění, sjednocení tónu pleti, podporu regenerace, péči o problematickou pleť nebo celkovou revitalizaci.

Hlavní benefity

Pravidelné používání může pomoci:

- **podpořit regeneraci pokožky**
- **zlepšit vzhled unavené a mdlé pleti**
- **podpořit tvorbu kolagenu a elastinu**
- **zjemnit vzhled jemných linek a vrásek**
- **podpořit pružnější a pevnější vzhled pokožky**
- **zklidnit začervenání a citlivou pleť**
- **podpořit sjednocení tónu pleti**
- **pečovat o problematickou a aknézní pleť**
- **podpořit mikrocirkulaci v pokožce**
- **vytvořit příjemný relaxační rituál**

Terapie je neinvazivní a bezbolestná. Přístroj nevyužívá UV záření, přesto je nutné během používání chránit oči a nedívat se přímo do světelného zdroje. Na produktové stránce je uvedeno, že LED diody mají vysokou svítivost a součástí balení jsou ochranné brýle pro vyšší komfort a bezpečí.

Světelné režimy

Přístroj nabízí 7 barevných režimů a blízké infračervené světlo. Jednotlivé režimy jsou určeny pro různé potřeby pokožky.

Červené světlo – 660 nm

Červené světlo je vhodné pro anti-aging péči, regeneraci a podporu pevnějšího vzhledu pokožky. Pomáhá stimulovat tvorbu kolagenu a elastinu, zjemňovat vzhled vrásek a podporovat mladistvější vzhled pleti. Produktová stránka uvádí červené světlo jako režim pro podporu tvorby kolagenu a elasticity.

Modré světlo – 470 nm

Modré světlo je vhodné pro mastnou a problematickou pleť. Pomáhá zklidňovat pokožku, podporovat čistší vzhled pleti a redukovat projevy nedokonalostí. Produktová stránka popisuje modré světlo jako režim vhodný pro péči o problematickou pleť.

Zelené světlo – 520 nm

Zelené světlo je vhodné pro pleť s nerovnoměrným tónem, pigmentacemi a známkami únavy. Pomáhá sjednocovat tón pleti, podporovat rozjasnění a celkově klidnější vzhled pokožky. Produktová stránka uvádí zelené světlo jako režim pro sjednocení tónu pleti.

Žluté světlo – 590 nm

Žluté světlo je vhodné pro unavenou, citlivější nebo začervenalou pleť. Pomáhá podporovat mikrocirkulaci, rozjasnění a svěžejší vzhled pokožky. Produktová stránka jej popisuje jako režim pro rozjasnění a revitalizaci.

Fialové světlo

Fialové světlo kombinuje vlastnosti červeného a modrého spektra. Je vhodné pro pleť, která potřebuje regeneraci a zároveň péči o nedokonalosti.

Tyrkysové / cyan světlo

Tyrkysové světlo je vhodné pro zklidnění citlivé nebo podrážděné pleti. Pomáhá snižovat pocit napětí a podporovat komfort pokožky. Produktová stránka uvádí tyrkysové světlo jako režim pro zklidnění pleti.

Oranžové světlo – 600 nm

Oranžové světlo je vhodné pro podporu vitality, rozjasnění a sjednocení pleti. Může být použito jako jemný revitalizační režim pro unavenou pleť.

Blízké infračervené světlo – 850 nm

Infračervené světlo proniká hlouběji do pokožky a je vhodné pro podporu regenerace, buněčné obnovy a celkové vitality pokožky. Produktová stránka uvádí infračervené světlo jako režim pro podporu regenerace a buněčné obnovy.

Popis ovladače

Ovladač slouží k zapnutí přístroje, volbě barevného režimu, nastavení intenzity světla, nastavení času a zapnutí nebo vypnutí infračervené funkce.

Ovladač obsahuje:

- tlačítko zapnutí / vypnutí,
- tlačítko M pro změnu světelného režimu,
- tlačítko pro nastavení intenzity,
- tlačítko pro nastavení času,
- tlačítko N pro zapnutí / vypnutí infračerveného světla,
- displej zobrazující režim, čas nebo stav zařízení.

Nabíjení

1. Připojte USB kabel k ovladači.
2. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému USB adaptéru nebo USB portu.
3. Během nabíjení bliká symbol napájení.
4. Po úplném nabití symbol zůstane svítit.
5. Pokud je napětí baterie nižší než 3,0 V, kontrolka bliká a přístroj se přibližně po 5 sekundách automaticky vypne.
6. Nízký stav baterie může být signalizován také zvukovým upozorněním.
7. Po nabití kabel odpojte.

Přístroj je možné během nabíjení zapnout, ale po použití se automaticky přepne zpět do režimu nabíjení. Pro běžné používání doporučujeme zařízení nejprve plně nabít.

Příprava před použitím

1. Očistěte pokožku v oblasti, kterou chcete ošetřovat.
2. Osušte pleť měkkým ručníkem.
3. Umístěte přístroj nad požadovanou oblast.
4. U obličeje si nasadte ochranné brýle nebo zavřete oči.
5. Připojte ovladač.
6. Zapněte přístroj a vyberte požadovaný režim.
7. Nastavte čas a intenzitu podle snášenlivosti pokožky.

Pokud přístroj používáte na obličej, je možné jej kombinovat s vhodnou pleťovou maskou, hydratačním sérem nebo kosmetikou podle typu pleti. Vyhněte se však přípravkům, které zvyšují citlivost pokožky na světlo.

Použití na obličej

1. Očistěte pleť a osušte ji.
2. Umístěte přístroj nad obličej tak, aby světlo dopadalo rovnoměrně na ošetřovanou oblast.
3. Zavřete oči nebo použijte ochranné brýle.
4. Zapněte přístroj.
5. Tlačítkem M vyberte požadovanou barvu světla.
6. Tlačítkem intenzity nastavte sílu světla.
7. Tlačítkem času nastavte délku použití.
8. Doporučená délka ošetření je 15–30 minut.
9. Po použití přístroj vypněte a pokračujte v běžné péči o pleť.

Nedívejte se přímo do světla a nezůstávejte pod světlem déle, než je doporučeno.

Použití na tělo

1. Přístroj lze použít také na jiné části těla, například krk, dekolt, záda, břicho, pas nebo nohy.
2. Použití vleže
3. Protáhněte pásy otvory na obou koncích přístroje.
4. Vytvarujte zařízení do oblouku.
5. Umístěte opěrku nebo polštář do středu podle potřeby.
6. Lehněte si pohodlně pod přístroj.
7. Zapněte světlo a nastavte režim.
8. Doporučená délka použití je 15–30 minut.

Použití na pas nebo nohy

1. Přiložte zařízení k ošetřované oblasti.
2. Pomocí pásků jej upevněte tak, aby drželo, ale netlačilo.
3. Zapněte zařízení.
4. Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí nastavte intenzitu světla.
5. Po použití zařízení sejměte a očistěte.

Nastavení režimů

Po zapnutí se rozsvítí světlo na přístroji. Krátkým stisknutím tlačítka M přepínáte mezi světelnými režimy v pořadí:

1. modré světlo,
2. žluté světlo,
3. zelené světlo,
4. fialové světlo,
5. oranžové světlo,
6. blízké infračervené světlo,
7. další barevný režim podle nastavení zařízení.

Displej může zobrazovat režimy jako P1–P7.

Nastavení intenzity

Krátkým stisknutím tlačítka napájení lze přepínat intenzitu světla.

Přístroj má 5 úrovní intenzity:

- a. stupeň – nejnižší intenzita,
- b. stupeň,
- c. stupeň,
- d. stupeň,
- e. stupeň – nejvyšší intenzita.

Při prvním použití začněte vždy na nižším stupni a intenzitu zvyšujte postupně podle snášenlivosti pokožky.

Nastavení času

Krátkým stisknutím tlačítka času lze nastavit délku terapie.

Dostupné nastavení:

- 15–20 minut,
- 25–30 minut.

Doporučená délka použití je 15–20 minut podle produktové stránky, přičemž v původním manuálu je uvedeno také použití do 30 minut. Při prvním použití doporučujeme kratší dobu a nižší intenzitu.

Infračervená funkce

Tlačítkem N lze samostatně zapnout nebo vypnout infračervené světlo.

Infračervená funkce může být kombinována s jakýmkoliv barevným režimem. Po zapnutí infračerveného světla lze současně používat vybranou barvu LED terapie.

Doporučená frekvence používání

Doporučená frekvence použití:

- intenzivnější péče: 2–3× týdně,
- udržovací péče: 1–2× měsíčně nebo podle potřeby,
- běžná domácí beauty rutina: 2–3× týdně podle snášenlivosti pleti.

Produktová stránka uvádí doporučenou délku terapie 15–20 minut a frekvenci 2–3× týdně. Pro intenzivnější kúru, například při řešení akné nebo hlubších vrásek, je uvedeno doporučení 2–3× týdně po dobu jednoho měsíce.

Použití s kosmetikou

Přístroj lze používat samostatně nebo v kombinaci s vhodnou kosmetickou péčí.

Doporučuje se kombinovat jej s:

- hydratační pleťovou maskou,
- regeneračním sérem,
- přípravky pro zklidnění pokožky,
- kosmetikou podporující hydrataci.

Nepoužívejte jej společně s produkty, které zvyšují fotosenzitivitu pokožky, například některé silné kyseliny, retinoidy nebo agresivní exfoliační přípravky, pokud jejich použití nebylo doporučeno odborníkem.

Čištění a údržba

Po každém použití přístroj vypněte a odpojte od napájení.

1. Povrch přístroje otřete měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
2. Světelnou část neponořujte do vody.
3. Elastické pásky lze čistit vodou samostatně.
4. Před uložením nechte všechny části zcela vyschnout.
5. Ochranné brýle očistěte měkkým hadříkem.
6. Uložte zařízení zpět do krabice nebo na bezpečné místo.

Nepoužívejte:

- alkohol,
- aceton,
- ředidla,
- abrazivní houbičky,
- tekoucí vodu přímo na hlavní zařízení.

Řešení problémů

Přístroj se nezapne

Možná příčina: baterie je vybitá.

Řešení: nabijte ovladač pomocí USB kabelu.

Možná příčina: tlačítko napájení nebylo podrženo dostatečně dlouho.

Řešení: podržte tlačítko napájení přibližně 2,5 sekundy.

Přístroj se rychle vypne

Možná příčina: nízké napětí baterie.

Řešení: nabijte zařízení.

Světlo je příliš silné

Snižte intenzitu světla, zavřete oči nebo použijte ochranné brýle.

Přístroj nereaguje na tlačítka

Zkontrolujte stav baterie a připojení ovladače. Pokud problém přetrvává, zařízení nerozebírejte a kontaktujte prodejce.

Přístroj zapáchá po rozbalení

Mírný zápach silikonového materiálu po otevření balení může být běžný a obvykle rychle zmizí. Před prvním použitím nechte zařízení vyvětrat.

Časté dotazy

Musím používat vodivý gel?

Ano. Při použití EMS mikroproudů je vodivý gel nezbytný. Bez gelu může být aplikace nepříjemná a přístroj nemusí fungovat efektivně.

Jaký pocit je při použití normální?

Běžné je jemné brnění, mravenčení nebo lehké nebolestivé záškuby svalů. Pokud je pocit příliš intenzivní, snižte úroveň výkonu.

Jak dlouho masku používat?

Doporučená délka jednoho použití je 10–15 minut.

Jak často masku používat?

Doporučená frekvence je 3–5× týdně podle snášenlivosti pokožky.

Kdy uvidím výsledky?

Svěžší vzhled nebo dočasné vypnutí pleti můžete pozorovat již po prvním použití. Dlouhodobější výsledky, například zlepšení vzhledu jemných linek a pevnosti pokožky, se obvykle objevují po 4–6 týdnech pravidelného používání.

Mohu masku používat každý den?

Při dobré snášenlivosti je možné častější používání, ale doporučujeme začít 2–3× týdně a postupně přejít na 3–5× týdně.


Mohu masku používat na krémy?

Pro EMS používejte vodivý gel na bázi vody. Mastné krémy a oleje nejsou vhodné, protože mohou snižovat vodivost a zhoršit pocit při použití.

Obsah balení

Balení obsahuje:


- Balení obsahuje:
- 1× hlavní silikonové PDT zařízení s držáky,
- 1× ovladač,
- 1× USB nabíjecí kabel,
- 1× opěrka hlavy,
- 1× pár ochranných brýlí,
- 2× upevňovací pásek,
- 2× držák,
- 1× uživatelský manuál,
- 1× dárková krabice.

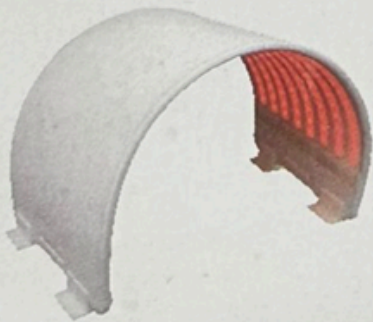

PDT silicone main device+bracket



Strap+Headrest

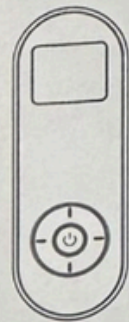

Controller

Důležité bezpečnostní pokyny

Přístroj používejte pouze podle tohoto manuálu.

Dodržujte následující pokyny:

- nedívejte se přímo do světelného zdroje,
- při použití na obličej zavřete oči nebo použijte ochranné brýle,
- pokud je světlo příliš silné, použijte ochranné brýle nebo překrytí očí,
- nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě,
- nepoužívejte přístroj na poraněnou nebo podrážděnou pokožku,
- nepoužívejte jej na otevřené rány, popáleniny nebo kožní infekce,
- nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený,
- nepoužívejte jej ve vodě ani ve vlhkém prostředí,
- neponořujte zařízení do vody,
- neskládejte, nemačkejte ani silně neohýbejte světelnou část,
- nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření,
- nečistěte jej agresivními chemikáliemi,
- neprovádějte neodborné opravy ani úpravy zařízení.

Světelná fólie obsahuje LED diody a elektrické obvody. Nesmí se mačkat, skládat, ohýbat nebo vystavovat tlaku. Při používání v posteli zařízení po použití vyjměte a neukládejte jej stlačené pod těžké předměty.

Kdy přístroj nepoužívat

Přístroj nepoužívejte, pokud:

- jste těhotná,
- je uživatelem dítě,
- máte epilepsii,
- máte onemocnění štítné žlázy nebo užíváte léky na štítnou žlázu,
- máte fotosenzitivitu,
- užíváte léky, které mohou zvyšovat citlivost na světlo,
- máte poraněnou pokožku, rány nebo čerstvé kožní poškození,
- máte aktivní kožní onemocnění v místě použití,
- máte závažné zdravotní potíže a použití nebylo schváleno lékařem.

Pokud se během použití objeví nepříjemné pocity, pálení, svědění, bolest, výrazné zarudnutí, závratě nebo jiná neobvyklá reakce, okamžitě přestaňte přístroj používat. V případě přetrvávajících potíží se poraďte s lékařem.

Technické informace

Konstrukce a technologie	* Typ zařízení: LED chromoterapeutický dóm * Určení: obličej, krk, dekolt a tělo * Počet LED diod: 240 LED * Technologie: LED světelná terapie (chromoterapie) * Konstrukce: obloukový dóm pro rovnoměrné pokrytí ošetřované oblasti
Světelná terapie	* Počet světelných režimů: 7 barev světla * Červené světlo: podpora tvorby kolagenu a elasticity * Modré světlo: péče o problematickou pleť * Zelené světlo: sjednocení tónu pleti * Žluté světlo: rozjasnění a revitalizace * Fialové světlo: regenerace pokožky * Tyrkysové světlo: zklidnění pleti * Bílé světlo: celková revitalizace * Infračervené světlo: podpora regenerace a buněčné obnovy
Napájení	* Napájení: 5 V / 1 A * Připojení: USB * Použití: domácí i profesionální
Doporučené použití	* Doporučená délka terapie: 15-20 minut * Doporučená frekvence: 2-3x týdně * Neinvazivní a bezbolestná terapie



bloominds®

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**