

bloominds®

Bloominds oční maska



Co je Bloominds oční maska?

Bloominds oční maska je kosmetické beauty zařízení určené pro domácí péči o oční okolí. Využívá kombinaci LED světelné terapie, EMS mikroproudů a RF liftingové technologie. Pomáhá pečovat o unavené oční okolí, podporuje pevnější a hladší vzhled pokožky, zlepšuje vzhled jemných linek, otoků a tmavých kruhů a přispívá k celkově svěžejšímu vzhledu pleti. Produkt pracuje se dvěma světelnými spektry, červeným světlem 630 nm a infračerveným světlem 850 nm.

Popis produktu

Bloominds oční maska je LED beauty zařízení vyrobené z ABS materiálu a silikonu s hladkým povrchem šetrným k pokožce. Ergonomický tvar masky je navržen tak, aby pohodlně přiléhal k oblasti kolem očí a umožnil rovnoměrnou péči v okolí spodních víček, vnějších koutků očí a horní části tváří.

Zařízení využívá kombinaci červeného světla 630 nm a infračerveného světla 850 nm. Tato světelná spektra jsou určena pro kosmetickou péči o pokožku, podporu regenerace a zlepšení vzhledu pleti. Maska obsahuje 30 LED diod a 60 světelných zdrojů, které zajišťují pokrytí očního okolí.

Součástí zařízení je nastavitelná intenzita, dobíjecí baterie a nastavitelné pásky pro pohodlné nošení.

Hlavní technologie

LED světelná terapie

Červené světlo 630 nm a infračervené světlo 850 nm působí na oblast očního okolí a podporují kosmetickou péči o pleť. Pomáhají zlepšovat vzhled unavené pokožky, podporovat přirozenou regeneraci a přispívat k hladšímu a pevnějšímu vzhledu pleti.

EMS mikroproudy

EMS mikroproudy využívají jemné elektrické impulzy, které stimulují obličejové svaly. Při správném použití s vodivým gelem můžete cítit jemné brnění, mravenčení nebo lehké nebolestivé záškuby svalů. Použití vodivého gelu je důležité, protože mikroproud potřebuje vodivé médium pro pohodlnou a účinnou aplikaci.

RF lifting

RF technologie podporuje pevnější vzhled pleti a pomáhá zlepšovat kontury v očním okolí. Je vhodná jako součást anti-aging péče pro pleť, která působí unaveně, povadle nebo méně pružně.

Hlavní benefity

Pravidelné používání Bloominds oční masky může pomoci:

- zlepšit vzhled unaveného očního okolí,
- podpořit pevnější a hladší vzhled pokožky,
- redukovat vzhled jemných linek a vrásek,
- zmírnit vzhled otoků v okolí očí,
- zlepšit vzhled tmavých kruhů,
- podpořit mikrocirkulaci v oblasti očního okolí,
- podpořit vstřebávání vhodných hydratačních sér a gelů,
- dodat pleti svěžejší a zářivější vzhled,
- vytvořit pohodlnou domácí beauty rutinu bez nutnosti návštěvy salonu.

Okamžitý efekt může být viditelný jako lepší prokrvení, svěžejší vzhled a dočasné vypnutí pleti. Dlouhodobější výsledky se obvykle dostavují při pravidelném používání po dobu několika týdnů. Produktová stránka uvádí doporučené používání 3–5× týdně a možnost viditelných výsledků po 4–6 týdnech pravidelné péče.

Příprava před použitím

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je zařízení a příslušenství kompletní. Před použitím masku plně nabijte.

Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně, nabíjení je dokončeno. Přibližná doba nabíjení je 2–3 hodiny.

Maska je vybavena nastavitelnými pásky. Protáhněte pásek otvorem na jedné straně masky a upevněte jej tak, aby maska při použití pohodlně držela na obličeji.

Nabíjení

1. Ujistěte se, že maska není během nabíjení používána.
2. Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu.
3. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému USB adaptéru nebo USB portu.
4. Během nabíjení svítí kontrolka červeně.
5. Po úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.
6. Po dokončení nabíjení kabel odpojte.

Používejte pouze vhodný nabíjecí kabel a adaptér s odpovídajícím výstupem. Přístroj nepoužívejte během nabíjení.

Popis ovládání

Maska má ovládací část s tlačítkem zapnutí, tlačítkem režimu/intenzity, indikátorem úrovně a kontrolkou nabíjení.

Tlačítko zapnutí / vypnutí

Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete zařízení.

Maska má automatické vypnutí po přibližně 10 minutách používání.

Tlačítko intenzity / režimu

Krátkým stisknutím přepínáte úroveň energie. Zařízení má celkem 5 úrovní intenzity.

Při prvním použití vždy začněte na nejnižší úrovni a intenzitu zvyšujte postupně podle snášenlivosti pokožky.


Indikátor úrovně

Indikuje aktuálně zvolenou úroveň intenzity.

Kontrolka nabíjení

Červená kontrolka značí nabíjení.

Zelená kontrolka značí plné nabití.

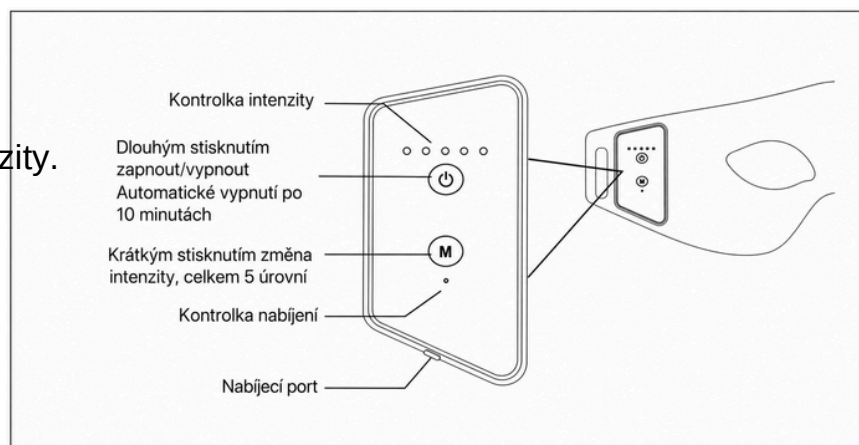

Použití masky

Krok 1: Vyčištění pleti

Před použitím důkladně očistěte obličej a oční okolí. Plet' osušte. Nepoužívejte masku na mokrou pokožku.

Krok 2: Nanesení vodivého gelu

Pro použití EMS mikroproudů naneste na oblast kontaktu s maskou dostatečné množství vodivého gelu na bázi vody. Bez gelu může být pocit nepříjemný, šťípavý nebo příliš intenzivní.

Krok 3: Nasazení masky

Přípevněte nastavitelné pásky a nasadte masku na oblast očí. Upravte pásek tak, aby maska pohodlně seděla a dobře přiléhala, ale netlačila.

Krok 4: Zapnutí

Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Krok 5: Nastavení intenzity


Krátkým stisknutím tlačítka režimu nastavte požadovanou úroveň intenzity. K dispozici je 5 úrovní. Při prvním použití začněte úrovní 1.

Krok 6: Délka použití

Jedno použití by mělo trvat přibližně 10–15 minut. Po použití masku sejměte a pokračujte v následné péči o pleť.

Krok 7: Péče po použití

Po ošetření pleť hydratujte vhodným sérem, gelem nebo krémem. Po použití masku jemně očistěte podle pokynů v části Čištění a údržba.

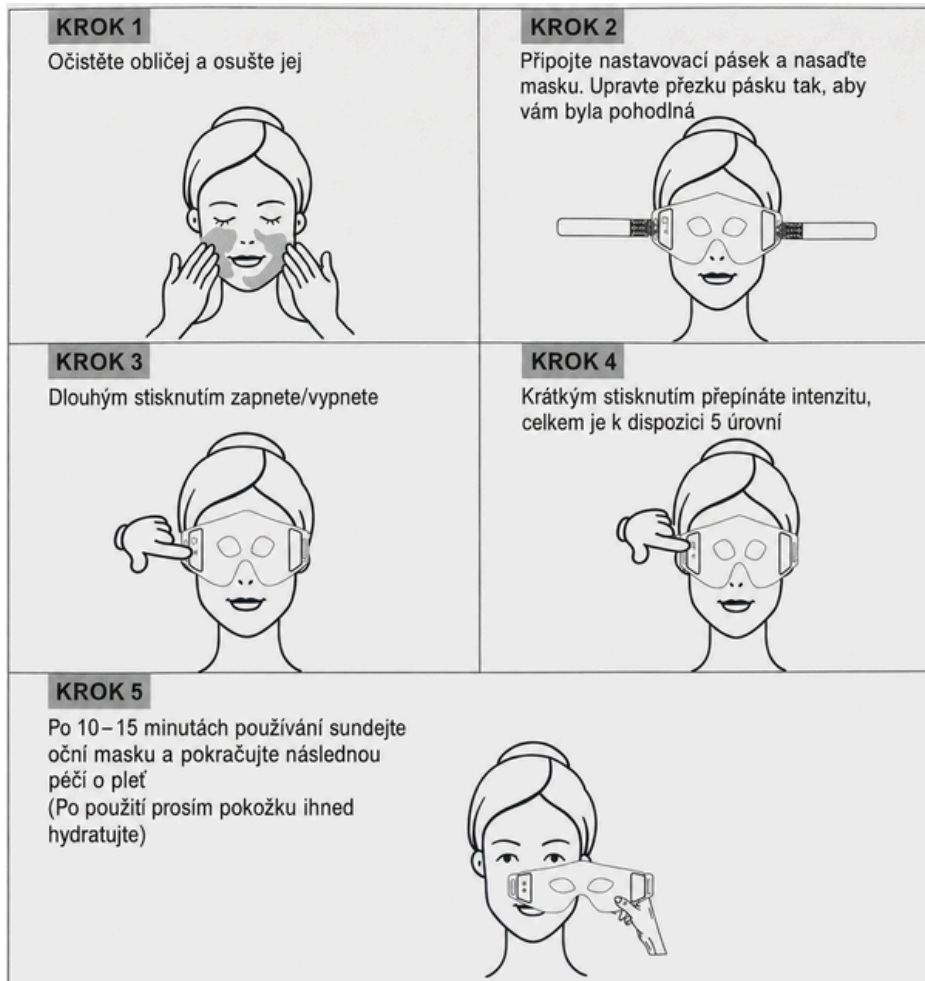

Doporučená délka a četnost používání

Doporučená délka jednoho použití je 10–15 minut.

Doporučená frekvence používání:

- začátečníci: 2–3× týdně,
- běžná péče: 3–5× týdně,
- citlivá pleť: méně často podle snášenlivosti.

Před prvním běžným použitím doporučujeme vyzkoušet působení na pokožce po dobu 1 minuty. Pokud se neobjeví nepříjemná reakce, můžete pokračovat.

Nezvyšujte dobu ani frekvenci používání příliš rychle. Sledujte aktuální stav pokožky a intenzitu nastavujte podle její snášenlivosti.

Doporučení pro začátečníky

Při prvním použití zvolte:

- nejnižší intenzitu,
- kratší dobu použití,
- dostatečné množství vodivého gelu,
- frekvenci maximálně 2–3× týdně.

Pokud je použití příjemné a pokožka nereaguje podrážděním, můžete postupně přejít na vyšší úroveň nebo častější používání.

Použití nesmí být bolestivé. Jemné brnění, mravenčení nebo lehké stahování svalů může být běžné. Pokud je pocit nepříjemný, snižte intenzitu nebo přístroj vypněte.

Použití s kosmetikou

Pro EMS mikroproudy používejte vodivý gel na bázi vody. Vhodný je například ultrazvukový gel nebo hydratační gel bez olejové složky.

Nepoužívejte:

- oleje,
- mastné krémy,
- přípravky s alkoholem,
- agresivní peelinky,
- kosmetiku s kyselinami těsně před použitím,
- produkty s fotosenzitivními složkami.

Po použití doporučujeme aplikovat hydratační sérum nebo krém.

Čištění a údržba

Pro lepší hygienu a delší životnost zařízení masku pravidelně čistěte, zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s pokožkou.

1. Po použití přístroj vypněte.
2. Otřete povrch čistým měkkým hadříkem.
3. V případě potřeby použijte lehce navlhčený hadřík.
4. Oční ochranu čistěte samostatně.
5. Před uložením nechte masku zcela vyschnout.

Nepoužívejte:

- alkohol,
- parfém,
- dezinfekční prostředky s alkoholem,
- aceton,
- agresivní chemikálie,
- korozivní čisticí prostředky,
- tekoucí vodu.

Produkt není vodotěsný. Neponořujte jej do vody a nemyjte jej pod proudem vody. Pokud máte podezření, že byl přístroj vystaven vodě, nepoužívejte jej.

Řešení problémů

Maska se nezapne

Možná příčina: baterie je vybitá.

Řešení: nabijte zařízení.

Možná příčina: tlačítko nebylo podrženo dostatečně dlouho.

Řešení: dlouze stiskněte tlačítko zapnutí.

Maska se nenabíjí

Možná příčina: kabel není správně připojen.

Řešení: zkontrolujte připojení USB-C kabelu.

Možná příčina: adaptér nebo USB port nefunguje.

Řešení: vyzkoušejte jiný USB port nebo adaptér.

EMS je nepříjemné nebo štípe

Možná příčina: není použit dostatek vodivého gelu.

Řešení: naneste více gelu na bázi vody.

Možná příčina: intenzita je příliš vysoká.

Řešení: snižte intenzitu na nižší úroveň.

Pokožka je po použití zarudlá

Mírné začervenání může být dočasné. Pokud zarudnutí, pálení, svědění nebo otok přetrvává, přestaňte masku používat a poraďte se s odborníkem.

Světlo nebo režim nefunguje správně

Zkontrolujte, zda je zařízení nabité. Pokud problém přetrvává, produkt nerozebírejte a kontaktujte prodejce.

Časté dotazy

Musím používat vodivý gel?

Ano. Při použití EMS mikroproudů je vodivý gel nezbytný. Bez gelu může být aplikace nepříjemná a přístroj nemusí fungovat efektivně.

Jaký pocit je při použití normální?

Běžné je jemné brnění, mravenčení nebo lehké nebolestivé záškuby svalů. Pokud je pocit příliš intenzivní, snižte úroveň výkonu.

Jak dlouho masku používat?

Doporučená délka jednoho použití je 10–15 minut.

Jak často masku používat?

Doporučená frekvence je 3–5× týdně podle snášenlivosti pokožky.

Kdy uvidím výsledky?

Svěžejší vzhled nebo dočasné vypnutí pleti můžete pozorovat již po prvním použití. Dlouhodobější výsledky, například zlepšení vzhledu jemných linek a pevnosti pokožky, se obvykle objevují po 4–6 týdnech pravidelného používání.

Mohu masku používat každý den?

Při dobré snášenlivosti je možné častější používání, ale doporučujeme začít 2–3× týdně a postupně přejít na 3–5× týdně.


Mohu masku používat na krémy?

Pro EMS používejte vodivý gel na bázi vody. Mastné krémy a oleje nejsou vhodné, protože mohou snižovat vodivost a zhoršit pocit při použití.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1× Bloominds oční maska,
- 1× nabíjecí kabel,
- 2× nastavitelný pásek,
- 1× uživatelský manuál,
- 2× ochranná oční vložka / krytka.

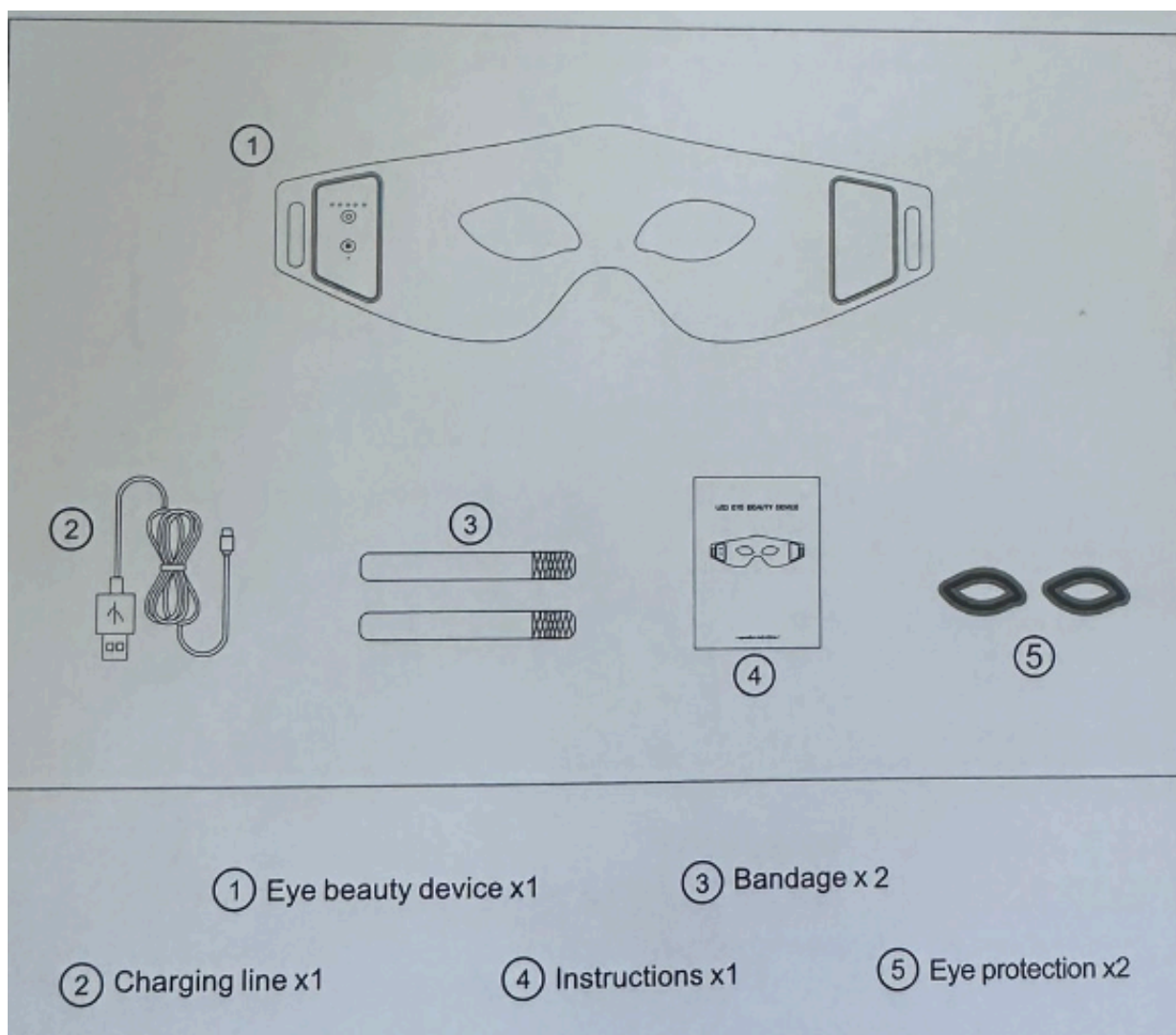

Důležité bezpečnostní pokyny

Produkt používejte pouze způsobem uvedeným v tomto manuálu. Nesprávné použití může způsobit podráždění pokožky, poškození zařízení nebo jinou nepříjemnou reakci.

Nepoužívejte produkt:

- k jinému účelu, než je kosmetická péče o oční okolí,
- na poraněnou, podrážděnou nebo nemocnou pokožku,
- pokud je přístroj poškozený,
- pokud byl vystaven vodě,
- během nabíjení,
- u kojenců a dětí,
- bez ochrany očí, pokud je vám světlo nepříjemné,
- společně s kosmetikou obsahující fotosenzitivní složky.

Během používání doporučujeme mít oči zavřené a správně používat oční ochranu.

Pokud se během použití objeví nepohodlí, pálení, bolest, silné brnění, zarudnutí, otok, svědění nebo jiná nepříjemná reakce, okamžitě používání ukončete.

Kdy masku nepoužívat

MMasku nepoužívejte, pokud:

- jste těhotná,
- kojíte,
- jste dítě nebo mladistvá osoba bez doporučení odborníka,
- máte fotosenzitivitu nebo onemocnění spojené s citlivostí na světlo,
- užíváte léky nebo používáte kosmetiku zvyšující citlivost na světlo,
- máte lupus erythematoses, fotosenzitivní ekzém, albinismus nebo jiné fotosenzitivní kožní onemocnění,
- máte aktivní kožní onemocnění v oblasti použití,
- máte otevřené rány, popáleniny, podráždění nebo infekci,
- máte závažné zdravotní, neurologické nebo smyslové potíže,
- nejste schopni bezpečně posoudit reakci pokožky,
- máte implantované elektronické zdravotnické zařízení, například kardiostimulátor, a použití nebylo schváleno lékařem.

Pokud máte dermatologické potíže nebo jste po kosmetickém zákroku v oblasti obličeje, používejte masku pouze po konzultaci s dermatologem.

Technické informace

Materiál produktu	<i>potravinářský silikon</i>
Typ LED diod	<i>5050</i>
Barvy světla	<i>červené / infračervené</i>
Kapacita baterie	<i>400 mAh lithiová baterie</i>
Nabíjecí port	<i>USB-C</i>
Doba nabíjení	<i>2-3 hodiny</i>
Výdrž provozu	<i>přibližně 1,5 hodiny</i>
Výkon	<i>2 W</i>



bloominds[®]

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**