

bloominds®

LED maska Bloominds



Co je LED maska Bloominds ?

LED maska Bloominds využívá technologii fotobiomodulace (PBM), která pomocí specifických vlnových délek světla podporuje přirozenou regeneraci pokožky. Díky kombinaci červeného, modrého, oranžového a blízkého infračerveného světla pomáhá zlepšovat vzhled pleti, redukovat známky stárnutí, zklidňovat problematickou pokožku a podporovat tvorbu kolagenu. Flexibilní silikonové provedení se dokonale přizpůsobí tvaru obličeje a zajišťuje maximální komfort během používání.

Popis produktu

LED maska využívá světelnou terapii (Photobiomodulation Therapy – PBM), která působí na kožní buňky pomocí přesně definovaných vlnových délek světla.

Světelná energie je absorbována mitochondriemi, které produkují více buněčné energie (ATP). Díky tomu dochází k podpoře regenerace pokožky, tvorbě kolagenu a elastinu, lepšímu prokrvení i zklidnění zánětlivých procesů.

Hlavní benefity

Pravidelné používání LED masky může pomoci:

- redukovat jemné vrásky,
- stimulovat tvorbu kolagenu,
- zpevnit pokožku,
- sjednotit tón pleti,
- zmírnit pigmentové skvrny,
- redukovat akné,
- zklidnit zarudnutí,
- podpořit regeneraci pokožky,
- zlepšit elasticitu pleti,
- rozjasnit unavenou pleť,
- regulovat tvorbu kožního mazu.

Světelné režimy

Červené světlo (630–635 nm)

Červené světlo podporuje tvorbu kolagenu a elastinu, zlepšuje pružnost pokožky a pomáhá redukovat jemné vrásky. Současně podporuje regeneraci buněk a přispívá k mladistvějšímu vzhledu pleti.

Doporučeno pro:

- vrásky,
- ochablou pleť,
- regeneraci,
- anti-aging péči.

Blízké infračervené světlo (850 nm)

Blízké infračervené světlo proniká do hlubších vrstev pokožky, kde podporuje buněčnou energii, regeneraci tkání a celkové omlazení pleti.

Doporučeno pro:

- hloubkovou regeneraci,
- podporu obnovy buněk,
- zlepšení elasticity pokožky.

Modré světlo (470 nm)

Modré světlo působí antibakteriálně, pomáhá redukovat bakterie způsobující akné a reguluje tvorbu kožního mazu. Současně zklidňuje problematickou pokožku.

Doporučeno pro:

- aknézní pleť,
- mastnou pleť,
- zanícenou pokožku.

Fialové světlo

Fialové světlo kombinuje účinky červeného a modrého světla. Podporuje regeneraci pokožky, pomáhá zmírňovat stopy po akné a přispívá ke zklidnění pleti.

Doporučeno pro:

- regeneraci,
- jizvičky po akné,
- problematickou pleť.

Bílé světlo

Bílé světlo podporuje metabolismus pokožky, pomáhá zlepšovat její pružnost a přispívá k celkovému omlazení vzhledu pleti.

Doporučeno pro:

- unavenou pleť,
- jemné vrásky,
- zlepšení celkového vzhledu pokožky.

Ovládání

Ovládací jednotka umožňuje snadné nastavení světelného režimu i délky terapie.

Zapnutí a vypnutí:

- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu přibližně 3 sekund.

Výběr světelného režimu:

- Krátkým stiskem tlačítka MODE přepínáte mezi jednotlivými režimy světla v pořadí:
 - červené,
 - modré,
 - fialové,
 - bílé.

Nastavení času:

- Krátkým stiskem tlačítka TIMER nastavíte délku terapie:
 - 10 minut,
 - 20 minut,
 - 30 minut.

Po ukončení nastaveného času se zařízení automaticky vypne.

Ovládací jednotka



Zobrazení času používání:
10 / 20 / 30 minut

Zapnutí / vypnutí / režim

Při každém stisknutí tlačítka se změní
barva LED světla v tomto pořadí:
červená / modrá / fialová / bílá

Jak používat LED masku

1. Před použitím důkladně očistěte a osušte pleť.
2. Připojte ovládací jednotku pomocí magnetického konektoru.
3. Nasadte masku na obličej a upravte ji tak, aby pohodlně seděla.
4. Zapněte zařízení podržením tlačítka ON/OFF.
5. Vyberte požadovaný světelný režim.
6. Nastavte délku terapie.
7. Po skončení procedury masku sejměte a aplikujte své oblíbené sérum nebo hydratační krém.

Doporučené používání

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat LED masku 3–5krát týdně po dobu 10 až 20 minut. Při pravidelném používání lze první výsledky pozorovat již po několika týdnech.

Nabíjení

Zařízení nabíjejte pomocí přiloženého magnetického USB kabelu.

- Nabíjecí napětí: 5 V / 1 A
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

Před prvním použitím doporučujeme zařízení plně nabít.

Čištění a údržba

Po každém použití jemně otřete vnitřní část masky měkkým hadříkem.

Masku neponořujte do vody ani jiných kapalin.


Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol ani rozpouštědla.

Zařízení skladujte na suchém místě při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- LED silikonová maska Bloominds
- Ovládací jednotka s integrovanou baterií
- Magnetický USB nabíjecí kabel
- Uživatelský manuál

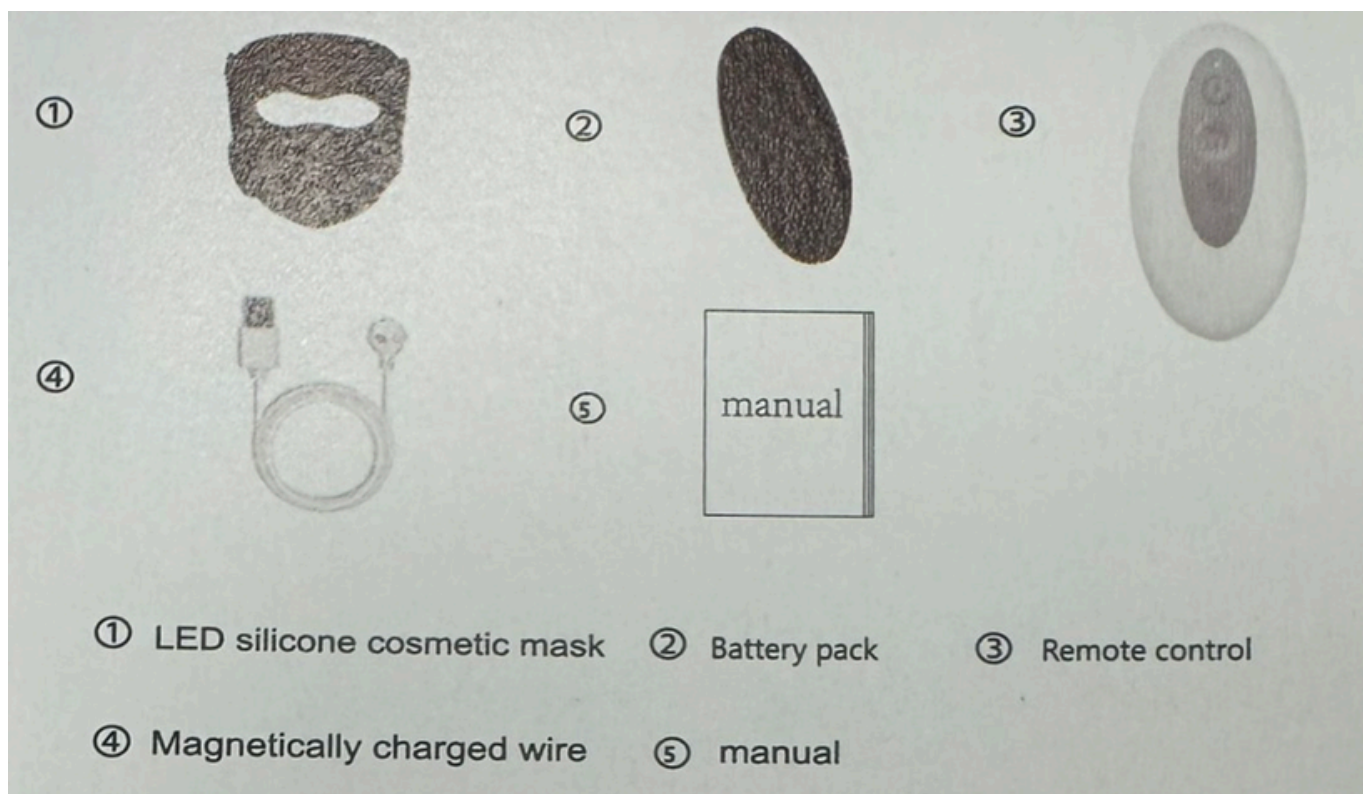

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod.

Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.

Nepoužívejte masku na otevřené rány ani při závažném kožním onemocnění bez konzultace s lékařem.

Pokud během používání zaznamenáte výrazné podráždění, svědění nebo zarudnutí, terapii přerušete.

Nedívejte se přímo do rozsvícených LED diod.

Masku neponořujte do vody.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.

Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravovat.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kdy masku nepoužívat

Masku nepoužívejte, pokud:

- jste těhotná,
- kojíte,
- jste dítě nebo mladistvá osoba bez doporučení odborníka,
- máte fotosenzitivitu nebo onemocnění spojené s citlivostí na světlo,
- užíváte léky nebo používáte kosmetiku zvyšující citlivost na světlo,
- máte lupus erythematosus, fotosenzitivní ekzém, albinismus nebo jiné fotosenzitivní kožní onemocnění,
- máte aktivní kožní onemocnění v oblasti použití,
- máte otevřené rány, popáleniny, podráždění nebo infekci,
- máte závažné zdravotní, neurologické nebo smyslové potíže,
- nejste schopni bezpečně posoudit reakci pokožky,
- máte implantované elektronické zdravotnické zařízení, například kardiostimulátor, a použití nebylo schváleno lékařem.

Pokud máte dermatologické potíže nebo jste po kosmetickém zákroku v oblasti obličeje, používejte masku pouze po konzultaci s dermatologem.

Technické informace

Barva	<i>Modrá, Růžová</i>
Materiál	<i>Potravinářský silikon</i>
Světelné režimy	<i>* Modré světlo (460 nm): péče o problematickou a aknézní pleť * Zelené světlo (525 nm): sjednocení tónu pleti a rozjasnění * Červené světlo (630 nm): podpora tvorby kolagenu a elasticity * Infračervené světlo (850 nm): hloubková regenerace pokožky</i>
Barva světla	<i>Modrá / Zelená / Červená / Blízké infračervené (NIR)</i>
Počet LED čipů	<i>64 ks</i>
Kapacita baterie	<i>4,2 V / 1200 mAh</i>
Ozařovací výkon	<i>63 mW/cm²</i>
Napájení	<i>USB</i>
Záruka	<i>3 roky</i>



bloominds®

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**